

Comfort

Love. Care.
Comfort.



Catálogo de produtos

2023

Cadeiras de rodas confortáveis especializadas em reabilitação
e descanso para crianças e adultos

SOBRE A EMPRESA

Somos uma empresa polaca que fabrica as cadeiras de rodas Comfort há 35 anos - especializadas para reabilitação. As nossas cadeiras são projetadas para crianças e adultos que sofrem de paralisia cerebral (PC), atrofia muscular espiiral (SMA) ou outras doenças que causam paralisia ou paresia das extremidades.

Um de nossos princípios básicos é satisfazer as expectativas pessoais de nossos clientes.

Durante o processo de fabricação das cadeiras de rodas Comfort, nós nos concentramos em conseguir um impacto ótimo nos pacientes. Com a consciência da importância do sistema vestibular e dos sistemas proprioceptivo para o crescimento do paciente, colocamos particular atenção em manter uma boa postura corporal na cadeira de rodas.

As nossas cadeiras de rodas são registradas no Escritório de Registro de Produtos Sanitários, Equipamentos Médicos e Produtos Biocidas.

Em 2005 implementamos o Sistema Internacional de Normalização ISO 1901:2000, que conduz ao cumprimento das mais exigentes normas de produção e atendimento ao cliente.

O nosso objetivo é proporcionar comodidade aos nossos clientes em todas as áreas da sua vida. Por esta razão, apoiamos ativamente as organizações que cuidam de pessoas com deficiência.

De acordo com a estratégia de RSE (Responsabilidade Social Empresarial) implementada em nossa empresa, nos envolvemos com diversos projetos de apoio e assistência para as pessoas com deficiências múltiplas e complexas.



CARACTERÍSTICAS DAS CADEIRAS DE RODAS COMFORT



Bem-estar

Todos os comentários sobre as cadeiras de rodas Comfort mostram que são extremamente confortáveis para crianças, adolescentes e também para adultos. As cadeiras de rodas Comfort são muito fáceis de usar.



Confiabilidade

Temos 40 anos de experiência em fabricação de cadeiras de rodas especializadas. Por este motivo, podemos oferecer uma garantia de 25 anos para a estrutura do produto.

As cadeiras de rodas Comfort são seguras porque nós nunca usamos elementos de plástico.



Assistência

O configurador de cadeira de rodas Comfort vai ajudar você a escolher o equipamento certo.

Podemos recomendar soluções para obter a subvenção máxima.



Personalização

O design personalizado da cadeira de rodas Comfort pode incluir uma prateleira para colocar o respirador, revestimento perfilado para a corcunda ou cintas especiais para as pernas.



Segurança

A construção e equilíbrio da cadeira de rodas Comfort garantem a estabilidade e a segurança do utilizador. Pneus com câmara e freio de dois pontos utilizados na cadeira de rodas Comfort garantem uma parada segura.



Funcionalidade

O tamanho ideal permite dobrar a cadeira e colocá-la mesmo dentro de um pequeno bagageiro.

As rodas giratórias permitem mover-se em espaços reduzidos e no exterior. A opção de reclinado está disponível.

O revestimento duplo do assento da cadeira de rodas permite usá-la mesmo quando a cobertura externa precisa de ser limpada. A construção das cadeiras de rodas Comfort permite que a criança se aproxime à mesa. Você pode escolher entre mais de uma dúzia de elementos úteis.

A cadeira de rodas Comfort pode ser adaptada e utilizada junto com a escada rolante TGR Jolly Junior. A cadeira de rodas Comfort garante a estabilidade corporal graças ao perfil otimizado do assento e almofadas de espuma que têm um impacto positivo na propriocepção.

A cadeira de rodas Comfort pode ser utilizada em conjunto com as almofadas estabilizadoras Stabilo.



CADEIRA DE RODAS ESPECIALIZADA COMFORT PARA CRIANÇAS

A cadeira de rodas especializada para crianças é confortável, segura, confiável, funcional e totalmente ergonômica, para garantir conforto e mobilidade em cada momento. É perfeita para proporcionar descanso e para se deslocar na cidade. Válida para exteriores e interiores.



ENCOSTO DE CABEÇA ERGONÔMICO AJUSTÁVEL

Estabiliza a posição correta do pescoço e da cabeça no caso de frouxidão muscular do pescoço ou permanentes distúrbios degenerativos.

ASSENTO COM DESIGN ESPECIAL

Garante estabilização e grande conforto mesmo durante horas passadas na cadeira de rodas. Vai afetar positivamente a propriocepção.

ALMOFADAS DE ESTABILIZAÇÃO

Permitem a estabilização do corpo, afetando positivamente a propriocepção.

CUNHA DE ABDUÇÃO

Permite ajustar as extremidades inferiores, corrigindo suavemente o alinhamento dos joelhos sem pontos de pressão desnecessários.

APOIO DE PÉS AJUSTÁVEL

Fácil ajuste da posição do apoio para os pés horizontal e verticalmente, dependendo das necessidades do usuário.

RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS

Tornam muito mais fácil a condução e a manobra da cadeira de rodas, especialmente em espaços reduzidos e também no exterior.

ENCOSTO RECLINÁVEL

Ajuste suave do ângulo do encosto até atingir uma posição horizontal.

CINTOS CONFORTÁVEIS

Cintos para estabilizar as extremidades inferiores, a pelve ou o peito de acordo com as necessidades do usuário.

REVESTIMENTO

Feito com material fácil de limpar.

ACESSO CONFORTÁVEL À MESA

A construção da cadeira de rodas permite que a criança possa se sentar confortavelmente à mesa (para modelos selecionados).

RODAS PNEUMÁTICAS

As rodas feitas de material resistente utilizadas em cadeiras mais pequenas não requerem uma manutenção.



Cores disponíveis



Z01



Z04



Z06



Z09



Z11



Z12



Z13



Z16



Z18

CADEIRA DE RODAS ESPECIALIZADA COMFORT PARA ADULTOS

A cadeira de rodas especializada para adultos é confortável, segura, confiável, funcional e totalmente ergonômica, para garantir conforto e mobilidade em cada momento. É perfeita para proporcionar descanso e para se deslocar na cidade. Válida para exteriores e interiores.



ENCOSTO DE CABEÇA ERGONÔMICO AJUSTÁVEL

Estabiliza a posição correta do pescoço e da cabeça no caso de frouxidão muscular do pescoço ou permanentes distúrbios degenerativos.

ASSENTO COM DESIGN ESPECIAL

Garante estabilização e grande conforto mesmo durante horas passadas na cadeira de rodas. Vai afetar positivamente a propriocepção.

ALMOFADAS DE ESTABILIZAÇÃO

Permitem a estabilização do corpo, afetando positivamente a propriocepção.

CUNHA DE ABDUÇÃO

Permite ajustar as extremidades inferiores, corrigindo suavemente o alinhamento dos joelhos sem pontos de pressão desnecessários.

APOIO DE PÉS AJUSTÁVEL

Fácil ajuste da posição do apoio para os pés horizontal e verticalmente, dependendo das necessidades do usuário.

RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS

Tornam muito mais fácil a condução e a manobra da cadeira de rodas, especialmente em espaços reduzidos e também no exterior.

ENCOSTO RECLINÁVEL

Ajuste suave do ângulo do encosto até atingir uma posição horizontal.

CINTOS CONFORTÁVEIS

Cintos para estabilizar as extremidades inferiores, a pelve ou o peito de acordo com as necessidades do usuário.

REVESTIMENTO DUPLO

Feito com material fácil de limpar.

PARA TODOS OS TIPOS DE PACIENTES

A construção da cadeira permite o transporte seguro de pacientes com peso até 130 kg

RODAS PNEUMÁTICAS

As rodas feitas de material resistente utilizadas em cadeiras mais pequenas não requerem uma manutenção.

Cores disponíveis



Comfort


TABELA DE COMPARAÇÃO



	Stroller for children				Stroller for adults			
	Baby [1]	Size [3]	Size [4]	Size [5]	Size [6]	Size [6+]	Size [7]	Size [8]
Finalidade de cadeira de rodas								
Idade aproximada do paciente	0 - 3	3 - 6	6 - 12	6 - 14	de 14	de 14	de 14	de 14
Peso máximo do paciente [kg]	30	35	50	50	75	75	90	130
Altura do paciente [cm]	110	140	145	155	150 - 165	160 - 180	160 - 180	160 - 180
Parâmetros da cadeira de rodas								
Largura do assento [cm]	33,5	35	38	38	41	41	44,5	52,5
Comprimento do assento / profundidade [cm]	27	33	37	41	45	48	48	48
Altura do encosto [cm]	55	66,5	70	76,5	78	83	83	83
Ângulo máximo de abertura contra posição padrão do encosto [°]	até 120°	até 135°	até 130°	até 135°	até 120°	até 120°	até 120°	até 120°
Faixa de ajuste de altura de apoio para os pés [cm]	23 - 26	27,5 - 33,5	31,5 - 42	32 - 42,5	36 - 46	36 - 46	36,5 - 46,5	36,5 - 46,5
Ângulo máximo de abertura do apoio para os pés em relação ao assento [°]	110°-155°	110° -145°	100° -135°	95° -135°	100° - 140°	95° - 150°	90° -130°	90° -130°
Peso aproximado da cadeira de rodas [kg]	15	21	23	23	26,2	26,5	28	32
Dimensões da cadeira de rodas após o dobramento (comprimento x largura x altura) [cm]	97,5 x 55 x 50,5	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54	122 x 70 x 54
Dimensões da cadeira de rodas (comprimento x largura x altura) [cm]	111 x 55 x 92	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95	148 x 70 x 95



EQUIPAMENTO

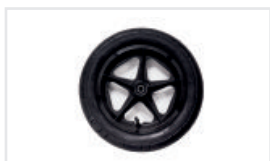


Rodas fixas 12,5" x 2,25
(Cat. no.: ST)



Cintos de segurança
(Cat. no.: ACPASBEZPR)



Revestimento duplo
(Cat. no.: ACTAPW)

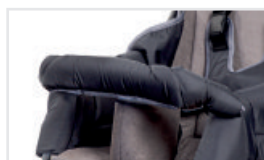

Barreira de proteção
(Cat. no.: ACBAR)



Cunha interfemoral
(abductiva)
(Cat. no.: ACKLIN)



Bolsa
(Cat. no.: ACTORPWW)



Encosto de cabeça
(Cat. no.: ACZAG)


SOLUÇÕES FUNCIONAIS



Rodas completamente giratórias
(Cat. no.: SK1)



Guidão ajustável
(Cat. no.: RŁ)

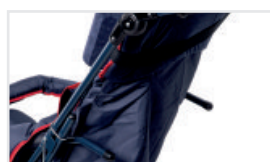

Encosto adaptado à corcunda
(Cat. no.: ACTAPG)



Proteção contra capotamento
(Cat. no.: ACUPP)



Encosto reclinável
(Cat. no.: OL)



Apoios de braço levantados
(Cat. no.: PP)

ACESSÓRIOS ADICIONAIS



Capota com coberta
(Cat. no.: BUDA)



Cintos para coxas
(Cat. no.: ACPASU)



Capa
(Cat. no.: ACPEL)



Almofadas laterais
(Cat. no.: ACPODUB)



Saco de dormir
(Cat. no.: ACŚPI)



Apoios lombares
(Cat. no.: ACPODPL)



Chapéu
(Cat. no.: PARASOL.KOL.)



Almofada lombar
(Cat. no.: ACPODUL)



Tabuleiro
(Cat. no.: ACSTOL)



Almofada do assento
(Cat. no.: ACPODUS)



Saco de guidão
(Cat. no.: TORBA.KOL.)



Revestimento externo
(Cat. no.: ACTAPW)



Protetores de mão
(Cat. no.: ACOCHRAC)



Protetor de apoio para os pés
(Cat. no.: ACOCHPOD)



Cintos para panturrilhas
(Cat. no.: ACPASŁ)



Cintos para tornozelos
(Cat. no.: ACPASK)



Cintos para pés
(Cat. no.: ACPASS)

DADOS ADICIONAIS

Convidamos você para usar a biblioteca de mídia e para seguir as nossas redes sociais.



YouTube

Canal com vídeos de Comfort

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ



Facebook

Perfil da marca que traz informações sobre novos produtos, atividades atuais da empresa e ações beneficentes.

facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073



Instagram


Perfil de imagens que mostra o uso de cadeiras de rodas, a utilização de acessórios e soluções funcionais.

instagram.com/comfortpolska




TABELA DE MEDIDAS

Como medir corretamente o usuário? Para escolher o tamanho correto da cadeira de rodas, é necessário realizar uma medição do usuário.

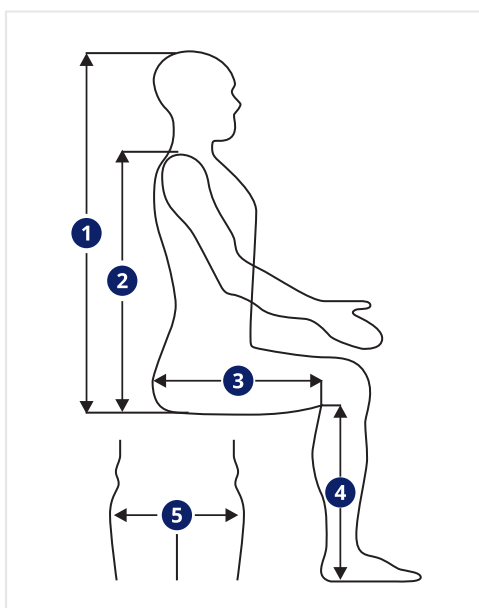

As 5 dimensões mais importantes:

- 1 O comprimento do corpo do assento até o topo da cabeça
- 2 O comprimento do corpo desde o assento até os ombros
- 3 O comprimento do corpo das costas até o joelho
- 4 O comprimento da canela (do joelho até a sola do pé)
- 5 Quadril (distância entre a parte mais larga)

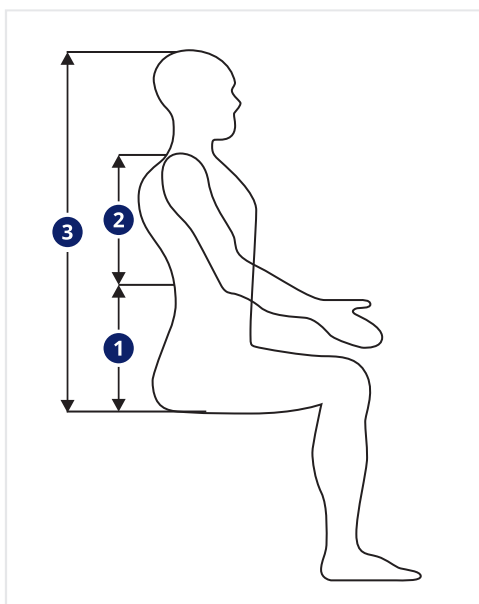

Se houver uma corcunda, é necessário aplicar um dimensionamento.

- 1 O comprimento da coluna lombar
- 2 O comprimento da corcunda dos ombros até o final de sua aparência
- 3 O comprimento do corpo do assento até o topo da cabeça

Além disso, deve ser indicado se a corcunda fica na esquerda ou na direita.



TESTEMUNHOS DE USUÁRIOS

“

Visitei pessoalmente as instalações do Comfort em Poznan, Polônia para ver e comprar uma cadeira de rodas para meu filho que sofre de paralisia cerebral e não pode andar sozinho. Com base em suas necessidades me foram oferecidas muitas opções. Escolhi Comfort (tamanho 5) para meu filho. Conheci a Laura que me apoiou durante o processo. Estou muito feliz por obter o equipamento para o meu filho. Eu recomendo a cadeira de rodas Comfort.

Pai de Anshul Ansh

“

O nosso filho Hubert sempre usou uma cadeira de rodas. Agora ele tem 30 anos. Só uma vez tivemos uma cadeira de rodas que não era Comfort. Estamos muito satisfeitos com a nossa escolha. A cadeira de rodas fabricada pela vossa empresa é muito confortável, não temos dúvidas. O nosso filho amou tanto sua cadeira e se acostumou de tal forma que parece que já formam uma dupla. Não queremos trocar esta cadeira por nenhuma outra. A cadeira de rodas Comfort é perfeita.

Mãe do Hubert

“

Desde os tempos do jardim de infância, quando Alexandre era pequeno, já tínhamos cadeira de rodas Comfort. Durante algum tempo estivemos trocando as cadeiras para escolher o modelo mais adequado. Ao longo de anos de experiência, estamos felizes em voltar à cadeira de rodas Comfort. É a melhor opção, estamos 100% convencidos. Estamos voltando depois de 20 anos para ter a cadeira de rodas Comfort novamente para sempre.

Aleksandra

“

A cadeira de rodas Comfort é uma das melhores que tivemos até agora. Confiamos muito em vocês. Se precisarmos de uma cadeira de rodas, então tem de ser sempre o Comfort!

Margaret

“

Sou um grande defensor das cadeiras de rodas Comfort. Desde que a pessoa atendida esteja no controle da posição sentada é uma opção ideal. Para aqueles que não têm essa estabilidade uma vez a cadeira de rodas foi devidamente adaptada, também pode cumprir sua função e ser um grande suporte tanto para a pessoa que a usa quanto para o cuidador. Eu sempre uso cadeiras de rodas Comfort - especialmente como um 'descanso'.

Dariusz

“

A nossa cadeira de rodas Comfort é uma escolha perfeita! Protege de uma forma exemplar ao fazer movimentos espontâneos e me tranquiliza sobre a segurança do meu filho.

Maciej

“

As cadeiras de rodas Comfort foram usadas por alunos de nossa escola durante muitos anos. São ideais para pessoas idosas cujas deformidades tornam impossível usar outras cadeiras de rodas. A ponto a favor é o sistema anti-inclinação que protege as pessoas com atetose grave.

Monika

“

A colaboração com o Comfort tem sido positiva. Adquirimos produtos que nos serviram por muitos anos e são nossos favoritos. Por este motivo, vamos encomendar ainda mais produtos.

Lar de idosos

“

Gostamos muito da cadeira de rodas Comfort. Cumpre o seu papel, tem uma cor bonita e tem muitos acessórios para escolher. Para mim, pessoalmente, é uma cadeira de rodas que traz alívio. Fico tranquilo sobre minha filha e ela pode se mover confortavelmente.

Mãe da Ania

“

A cadeira de rodas Comfort é muito boa, linda e proporciona a oportunidade de sair do lar. Agradecemos suas idéias, esta cadeira é tudo para nós.

Marianna

“

Meu filho Olaf é um adulto. Comprei duas cadeiras de rodas Comfort para lidar melhor com as necessidades diárias. Eu tiro o meu filho do apartamento eu mesmo, então sempre tive que carregar a cadeira de rodas e agora é mais fácil para mim. Eu me movo o menino, a cadeira está esperando, ficamos contentes. A cadeira de rodas está em conformidade com as nossas expectativas - um modelo serve para uso doméstico e outro é para viagens.

Pai do Olaf

“

Estamos muito felizes com o Comfort. A cadeira de rodas é muito boa e durável. O material é muito bom e não mancha. Muito confortável e muito bem feito. Comfort é um empresa inteligente e compreensiva. A cadeira de rodas é feita para cumprir com o requisitos do cliente e satisfaz as necessidades de pessoas com deficiência. Recomendo vivamente esta empresa.

Joanna

Love. Care. Comfort.

Comfort

WSR COMFORT sp. z o. o.
ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań, Poland



www.comfort-reha.pl/en



+48 531 539 355



Our catalogue

