

Comfort

Love. Care.
Comfort.



Каталог продукції

2023

Зручні спеціалізовані реабілітаційні
коляски для дітей та дорослих

ПРО ФІРМУ

Ми польська компанія, яка протягом 35 років розробляє та виробляє спеціалізовані реабілітаційні інвалідні коляски Comfort для дітей та дорослих, які страждають на церебральний параліч (ДЦП), спинальну м'язову атрофію (СМА) або інші захворювання, що викликають параліч та парез кінцівок.

Основний принцип, якого ми дотримуємося, полягає в тому, щоб реагувати на індивідуальні потреби наших клієнтів.

При цьому ми приділяємо особливу увагу необхідності підтримки правильної постави тіла в інвалідній колясці, розуміючи, наскільки важливою є вестибулярна та пропріоцептивна система для розвитку пацієнта.

Багаторічний досвід та тисячі користувачів по всьому світу дозволили нам створити продукт, який є супер зручним, безпечним, надійним та функціональним.

Коляски Comfort значно підвищують комфорт життя дітей, підлітків, дорослих та їх опікунів.

Наші коляски зареєстровані в Управлінні реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних засобів.

У 2005 році ми запровадили систему управління якістю ISO 9001:2000, що дозволяє підтримувати найвищі стандарти виробництва та обслуговування клієнтів.

Наша мета – забезпечити комфорт нашим пацієнтам у всіх сферах їхнього життя, тому ми активно підтримуємо фонди, які допомагають інвалідам.

Відповідно до стратегії КСВ, прийнятої в нашій компанії, ми беремо участь у численних проєктах, спрямованих на підтримку та допомогу людям із множинними та складними порушеннями.



ОСОБЛИВОСТІ КОЛЯСКИ COMFORT



Зручність

Всі відгуки про візки Comfort говорять про те, що вони дуже зручні для дітей, підлітків та дорослих. Багато хто називає їх перепочинком.

Коляски Comfort прості у використанні. Нема складних механізмів, які можуть зламатися.



Функціональність

Оптимальна конструкція коляски дозволяє скласти її в багажник меншого розміру, ніж Ви могли б подумати.

Оптимальна конструкція коляски Comfort та поворотні колеса дозволяють вільно пересуватися у невеликих приміщеннях та в тому місці, де хочеться провести час.

Опція горизонтального положення доступна для інвалідних візків Comfort розмірів [1], [2], [3], [4] та [5]. Напівлежачий варіант (шезлонг) в інших розмірах. Конструкція коляски гарантує стійкість та безпеку кожного положення.

Подвійна оббивка дозволяє користуватися візком навіть тоді, коли верхня оббивка потребує чищення. Ми використовуємо матеріали, які легко чистити.

Коляски Comfort дозволяють дитині зручно сидіти за столом (належить до колясок розмірів [1], [2], [3], [4], [5] на нерухомих та поворотних колесах).

Ви можете вибрати десяток додаткових одиниць обладнання, корисного для використання коляски.

Ви живете в будинку зі сходами – у нас є рішення. Коляска Comfort може бути адаптована для використання з гусеничним сходовим підйомником TGR Jolly Junior.



Надійність

40-річний досвід проектування, конструювання та виробництва спеціалізованих інвалідних колясок дозволяє нам бути впевненими у їх якості, тому ми пропонуємо 25-річну гарантію на раму.

Для того, чтобы коляски Comfort были надежными, мы не используем в их производстве ломающиеся пластиковые элементы. Мы выбираем металлические сплавы – более тяжелые и гарантирующие надежность.



Підтримка

Конфігуратор коляски Comfort допоможе вам вибрати оптимальну модель із правильним обладнанням.

Ми проконсультуємо вас про те, що і як ви маєте зробити, щоб отримати максимально доступне фінансування. Ми обслугуємо або відремонтуємо вашу коляску за гарантією та після неї протягом кількох днів.



Індивідуальність

Потрібна додаткова полиця для насоса або респіратора? Ми підготуємо його для коляски в рамках індивідуального проекту коляски Comfort. Вам потрібна спеціально профільована оббивка для вашого горба? Ми його підготуємо. Чи потрібний вашій дитині клин, що розділяє ноги в колінно-стегнової частини? Ми зробимо таку.



Безпека

Конструкція та балансування коляски Comfort гарантують стабільність та безпеку використання. Якщо вам потрібний додатковий захист від перекидання - ми додамо його до конфігурації коляски.

Спеціальні трубчасті шини, що використовуються в колясках Comfort, разом із двоточковими гальмами гарантують, що коляска зупиниться на паркеті та бездоріжжі та буде безпечно знерухомлена.



СПЕЦІАЛЬНА ІНВАЛІДНА КОЛЯСКА COMFORT ДЛЯ ДІТЕЙ

Зручна, безпечна, надійна, функціональна, повністю ергономічна, спеціальна інвалідна коляска для дітей та дорослих, що забезпечує комфорт та мобільність щодня. Ідеально підходить для відпочинку та для прогулянок містом, за містом та в приміщеннях.



Глибокий регульований підголівник

Стабілізує правильне положення шиї та голови при м'якості м'язів шиї або дегенеративних змінах

Спеціальний профіль сидіння

Гарантує стабільність та дуже високий комфорт навіть під час багатогодинного перебування у колясці. Чинить позитивний вплив на пропріоцепцію

Стабілізуючі подушки/опори

Вони дозволяють стабілізувати корпус, позитивно впливаючи на пропріоцепцію.

Клин утримуючий

Він притримує нижні кінцівки, м'яко коригуючи положення колін без надмірного точкового тиску.

Регульована підставка для ніг

Легко регульована підставка для ніг по горизонталі та вертикалі відповідно до потреб користувача.

Поворотні передні колеса

Вони полегшують ведення коляски, маневрування нею, особливо у вузьких та тісних приміщеннях та на вулиці/за містом.

Спинка з опцією положення лежачи

Плавні налаштування кута нахилу спинки в положення лежачи на спині як опція.

Зручні ремені

Ремені, що дозволяють стабілізувати нижні кінцівки, таз, грудну клітку, залежно від потреб користувача.

Оббивка

Виготовлена з матеріалу, що легко очищається.

Можливість комфортно під'їжджати до столу

Конструкція коляски дозволяє дитині зручно сидіти за столом (для вибраних моделей).

Цілісні колеса

Цілісні колеса, що використовуються в найменших колясках, не потребують технічного обслуговування.



Available colors



СПЕЦІАЛЬНА ІНВАЛІДНА КОЛЯСКА COMFORT ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ

Зручна, безпечна, надійна, функціональна, повністю ергономічна, спеціальна інвалідна коляска для дітей та дорослих, що забезпечує комфорт та мобільність щодня. Ідеально підходить для відпочинку та для прогулянок містом, за містом та в приміщеннях.



Глибокий регульований підголівник

Стабілізує правильне положення шиї та голови при м'язовості м'язів шиї або дегенеративних змінах

Спеціальний профіль сидіння

Гарантує стабільність та дуже високий комфорт навіть під час багатогодинного перебування у колясці. Чинить позитивний вплив на пропріоцепцію

Стабілізуючі подушки/опори

Вони дозволяють стабілізувати корпус, позитивно впливаючи на пропріоцепцію.

Клин утримуючий

Він притримує нижні кінцівки, м'яко коригуючи положення колін без надмірного точкового тиску.

Регульована підставка для ніг

Легко регульована підставка для ніг по горизонталі та вертикалі відповідно до потреб користувача.

Поворотні передні колеса

Вони полегшують ведення коляски, маневрування нею, особливо у вузьких та тісних приміщеннях та на вулиці/за містом.

Спинка з опцією положення лежачи

Плавні налаштування кута нахилу спинки в положення лежачи на спині як опція.

Зручні ремені

Ремені, що дозволяють стабілізувати нижні кінцівки, таз, грудну клітку, залежно від потреб користувача.

Подвійна оббивка

Можливість використання коляски навіть тоді, коли верхня оббивка потребує очищення

Навіть для дуже великих пацієнтів

Конструкція коляски забезпечує безпечне транспортування пацієнтів вагою до 90 кг.

Пневматичні колеса

Трубчасті шини з двоточковими гальмами гарантують, що коляска буде зупинена на паркеті та бездоріжжі та безпечно знерухоплена.



Available colors



Comfort

PURPOSE



	Stroller for children				Stroller for adults		
	Baby [1]	Size [3]	Size [4]	Size [5]	Size [6]	Size [6+]	Size [7]
The purpose of the stroller							
Age of the patient	0 - 3	3 - 6	6 - 12	6 - 14	from 14	from 14	from 14
Maximum patient weight [kg]	30	35	50	50	75	75	90
Patient height [cm]	110	140	145	155	150 - 165	160 - 180	160 - 180
Stroller parameters							
Seat width [cm]	33,5	35	38	38	41	41	44,5
Seat length/depth [cm]	27	33	37	41	45	48	48
Backrest height [cm]	55	66,5	70	76,5	78	83	83
Maximum opening angle against the backrest [°] standard position	up to 120°	up to 135°	up to 130°	up to 135°	up to 120°	up to 120°	up to 120°
Footrest height adjustment range [cm]	23 - 26	27,5 - 33,5	31,5 - 42	32 - 42,5	36 - 46	36 - 46	36,5 - 46,5
Max footrest opening angle in relation to the seat [°]	110°-155°	110° -145°	100° -135°	95° -135°	100° - 140°	95° - 150°	90° -130°
Approximate weight of trolley [kg]	15	21	23	23	26,2	26,5	28
Stroller dimensions after folding (length x width x height) [cm]	97,5 x 55 x 50,5	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54
Stroller dimensions (length x width x height) [cm]	111 x 55 x 92	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95



УСТАТКУВАННЯ



Колесо
(Cat. no.: ST)



Ремені безпеки
(Cat. no.: ACPASBEZPR)



Подвійна оббивка
(Cat. no.: ACTAPW)



Бар'єр
(Cat. no.: ACBAR)



Клин міжстегновий
(утримуючий)
(Cat. no.: ACKLIN)




Сумка під коляскою
(Cat. no.: ACTORPWW)




Підголівник
(Cat. no.: ACZAG)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ

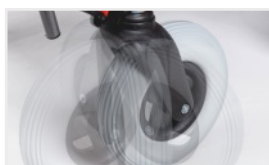

Цілісні поворотні колеса
(Cat. no.: SK1)

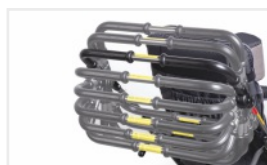

Регульована ручка
(Cat. no.: RL)



Спинка адаптована до горба
(Cat. no.: ACTAPG)



Захист від перекидання
(Cat. no.: ACUPP)



Спинка з нахилом до положення лежачи
(Cat. no.: OL)



Підвищені підлокітники
(Cat. no.: PP)

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ




Будка з фартухом
(Cat. no.: BUDA)



Ремені на стегна
(Cat. no.: ACPASU)



Дошовик
(Cat. no.: ACPEL)

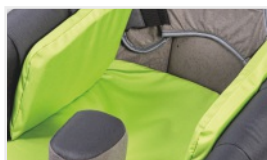

Бічні подушки
(Cat. no.: ACPODUB)



Спальний мішок
(Cat. no.: ACŚPI)



Поперекові опори
(Cat. no.: ACPODPL)



Парасолька
(Cat. no.: PARASOL.KOL.)



Поперекова подушка
(Cat. no.: ACPODUL)



Столик
(Cat. no.: ACSTOL)



Подушка для сидіння
(Cat. no.: ACPODUS)



Торба на ручку
(Cat. no.: TORBA.KOL.)



Верхня оббивка
(Cat. no.: ACTAPW)



Захист на ручці
(Cat. no.: ACOCHRAС)



Захист на підставку для ніг
(Cat. no.: ACOCHPOD)



Ремені на литкову поверхню
(Cat. no.: ACPASŁ)



Ремені на щиколотки
(Cat. no.: ACPASK)



Ремені на стопи
(Cat. no.: ACPASS)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Ми запрошуємо вас використовувати електронну медіатеку та стежити за нашими соціальними мережами



YouTube

Відеоканал Comfort

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ



Facebook

Профіль бренду, що інформує про нові продукти, поточну діяльність компанії та благодійну діяльність

facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073



Instagram

Профіль зображень, що показує використання колясок, використання аксесуарів та функціональних рішень

instagram.com/comfortpolska



Digital Content


Електронна медіатека, де ви можете знайти та завантажити фотографії, відео, описи та відгуки користувачів для ваших цифрових презентацій.

comfort-reha.pl/content/




MEASUREMENT TABLE

How to correctly measure the User? In order to choose the right one the size of the trolley, the measurement of the User should be made.

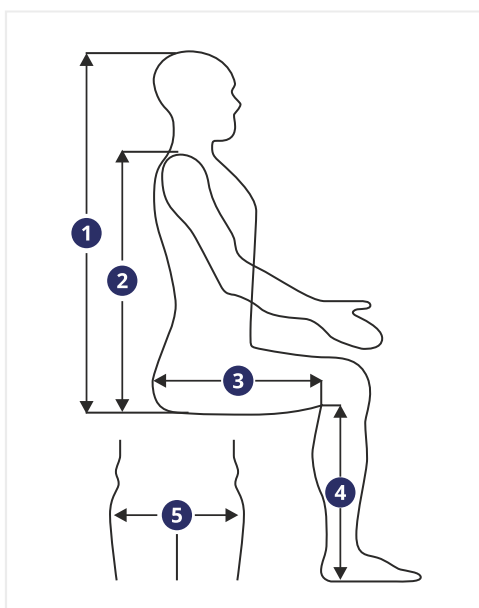

The most important are 5 dimensions:

- ❶ The length of the body from the seat to the top of the head
- ❷ The length of the body from the seat to the shoulders
- ❸ The length of the body from the back to the knee well
- ❹ Shin length (from the knee to the sole)
- ❺ Hips (distance between the widest places)

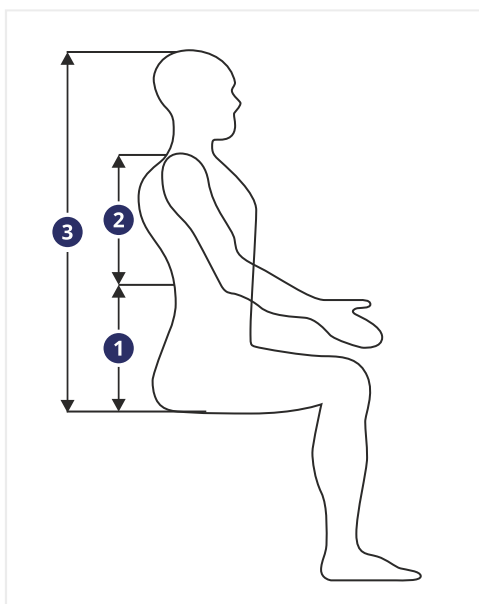

If there is a hump, it is necessary accurate dimensioning.

- ❶ Length of the lumbar spine
- ❷ The length of the hump from the shoulders to the end of its occurrence
- ❸ The length of the body from the seat to the top of the head

Dodatkowo należy wskazać czy garb jest lewostronny czy prawostronny.

Love. Care. Comfort.

Comfort

WSR COMFORT sp. z o. o.

ul. Krzywa 23, 60-118 Poznań, Poland

www.comfort-reha.pl/en



+48 61 863 85 61



Our catalogue

