

Comfort

Love. Care.
Comfort.



Каталог продукції

2023

Зручні спеціалізовані реабілітаційні
коляски для дітей та дорослих

ПРО ФІРМУ

Ми польська компанія, яка протягом 35 років розробляє та виробляє спеціалізовані реабілітаційні інвалідні коляски Comfort для дітей та дорослих, які страждають на церебральний параліч (ДЦП), спинальну м'язову атрофію (СМА) або інші захворювання, що викликають параліч та парез кінцівок.

Основний принцип, якого ми дотримуємося, полягає в тому, щоб враховувати індивідуальні потреби наших клієнтів.

При цьому, ми приділяємо особливу увагу необхідності підтримки правильного положення тіла в інвалідній колясці, розуміючи, наскільки важливою є вестибулярна та пропріоцептивна система для розвитку пацієнта.

Багаторічний досвід та тисячі користувачів по всьому світу дозволили нам створити продукт, який є дуже зручним, безпечним, надійним та функціональним.

Коляски Comfort значно підвищують комфорт життя дітей, підлітків, дорослих та їх опікунів.

Наші коляски зареєстровані в Управлінні реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних засобів.

У 2005 році ми запровадили систему управління якістю ISO 9001:2000, що дозволяє підтримувати найвищі стандарти виробництва та обслуговування клієнтів.

Наша мета – забезпечити комфорт нашим пацієнтам у всіх сферах їхнього життя, тому ми активно підтримуємо фонди, які допомагають особам з інвалідністю.

Відповідно до стратегії КСВ, прийнятої в нашій компанії, ми беремо участь у різноманітних проектах, спрямованих на підтримку та допомогу людям із численними, складними порушеннями.



ОСОБЛИВОСТІ КОЛЯСКИ COMFORT



Зручність

Всі відгуки про коляски Comfort говорять про те, що вони дуже зручні для дітей, підлітків та дорослих. Багато хто називає їх справжнім перепчинком.

Коляски Comfort прості у використанні. Немає складних механізмів, які можуть легко зламатися.



Функціональність

Оптимальна конструкція коляски дозволяє скласти її в багажник меншого розміру, ніж Ви могли б подумати.

Оптимальна конструкція коляски Comfort та поворотні колеса дозволяють вільно пересуватися у невеликих приміщеннях та у будь-яких інших місцях перебування.

Опція горизонтального (лежачого) положення доступна для інвалідних колясок Comfort розмірів [1], [2], [3], [4] та [5]. Напівлежачий варіант (шезлонг) в інших розмірах. Конструкція коляски гарантує стійкість та безпеку кожного положення.

Подвійна оббивка дозволяє користуватися коляскою навіть тоді, коли верхня оббивка потребує чистення. Ми використовуємо лише ті матеріали, які легко чистити.

Коляски Comfort дозволяють дитині зручно сидіти за столом (а саме коляски розмірів [1], [2], [3], [4], [5] на нерухомих та поворотних колесах).

Ви можете вибрати різноманітні додаткові аксесуари, що будуть корисними у використанні коляски.

Ви живете в будинку зі сходами – у нас є рішення. Коляска Comfort може бути адаптована для використання з гусеничним сходовим підйомником TGR Jolly Junior.



Надійність

40-річний досвід проектування, конструювання та виробництва спеціалізованих інвалідних колясок дозволяє нам бути впевненими у їх якості, тому ми пропонуємо 25-річну гарантію на раму.

Для того, щоб коляски Comfort були надійними, ми не використовуємо у процесі їх виробництва пластикові елементи, що легко ламаються. Ми обираємо металеві сплави, які є більш міцними та гарантують надійність.



Підтримка

Конфігуратор коляски Comfort допоможе Вам вибрати оптимальну модель із правильним обладнанням.

Ми проконсультуємо Вас щодо того, що і як Ви маєте зробити, щоб отримати максимально доступне фінансування. Ми обслужуємо або відремонтуємо Вашу коляску по гарантії та після неї протягом кількох днів.



Індивідуальність

Потрібна додаткова полиця для насоса або респіратора? Ми підготуємо її для коляски в межах індивідуального проекту коляски Comfort. Вам потрібна спеціально профільована оббивка до вигину Вашого хребта? Ми її підготуємо. Чи потрібний Вашій дитині абдуктор, що розділяє ноги в колінно-стегновій частині? Ми зробимо такий.



Безпека

Конструкція та балансування коляски Comfort гарантують стабільність та безпеку використання. Якщо Вам потрібний додатковий захист від перекидання - ми додамо його до конфігурації коляски.

Спеціальні трубчасті шини, що використовуються в колясках Comfort, разом із двоточковими гальмами гарантують, що коляска зупиниться на паркеті та бездоріжжі і буде безпечно знерухомлена.



СПЕЦІАЛЬНА ІНВАЛІДНА КОЛЯСКА COMFORT ДЛЯ ДІТЕЙ

Зручна, безпечна, надійна, функціональна, повністю ергономічна, спеціальна інвалідна коляска для дітей та дорослих, що забезпечує комфорт та мобільність щодня. Ідеально підходить для відпочинку та для прогулянок містом, за містом та в приміщеннях.



Глибокий регульований підголівник

Стабілізує правильне положення шиї та голови при млявості м'язів шиї або дегенеративних змінах

Спеціальний профіль сидіння

Гарантує стабільність та комфорт вищого рівня навіть під час багатогодинного перебування у колясці. Чинить позитивний вплив на пропріоцепцію

Стабілізуючі подушки/опори

Вони дозволяють стабілізувати корпус, позитивно впливаючи на пропріоцепцію.

Абдуктор (утримуючий)

Він притримує нижні кінцівки, м'яко коригуючи положення колін без надмірного точкового тиску.

Регульована підставка для ніг

Підставка, що легко регулюється по горизонталі та вертикалі, відповідно до потреб користувача.

Поворотні передні колеса

Вони полегшують ведення коляски, маневрування нею, особливо у вузьких, тісних приміщеннях та на вулиці/за містом.

Спинка з можливістю налаштування лежачого положення

Спинка з можливістю налаштування кута нахилу в лежаче положення

Зручні ремені

Ремені, що дозволяють стабілізувати нижні кінцівки, таз, грудну клітку, залежно від потреб користувача.

Оббивка

Виготовлена з матеріалу, що легко чистити.

Можливість комфортно під'їжджати до столу

Конструкція коляски дозволяє дитині зручно сидіти за столом (для вибраних моделей).

Цілісні колеса

Цілісні колеса, що використовуються в найменших колясках, не потребують технічного обслуговування.



Доступні кольори



Z01



Z04



Z06



Z09



Z11



Z12



Z13



Z16



Z18

СПЕЦІАЛЬНА ІНВАЛІДНА КОЛЯСКА COMFORT ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ

Зручна, безпечна, надійна, функціональна, повністю ергономічна, спеціальна інвалідна коляска для дітей та дорослих, що забезпечує комфорт та мобільність щодня. Ідеально підходить для відпочинку та для прогулянок містом, за містом та в приміщеннях.



Глибокий регульований підголівник

Стабілізує правильне положення шиї та голови при м'якості м'язів шиї або дегенеративних змінах

Спеціальний профіль сидіння

Гарантує стабільність та комфорт вищого рівня навіть під час багатогодинного перебування у колясці. Чинить позитивний вплив на пропріоцепцію

Стабілізуючі подушки/опори

Вони дозволяють стабілізувати корпус, позитивно впливаючи на пропріоцепцію.

Абдуктор (утримуючий)

Він притримує нижні кінцівки, м'яко коригуючи положення колін без надмірного точкового тиску.

Регульована підставка для ніг

Підставка, що легко регулюється по горизонталі та вертикалі, відповідно до потреб користувача.

Поворотні передні колеса

Вони полегшують ведення коляски, маневрування нею, особливо у вузьких, тісних приміщеннях та на вулиці/за містом.

Спинка з можливістю налаштування лежачого положення

Спинка з можливістю налаштування кута нахилу в лежаче положення

Зручні ремені

Ремені, що дозволяють стабілізувати нижні кінцівки, таз, грудну клітку, залежно від потреб користувача.

Подвійна оббивка

Можливість використання коляски навіть тоді, коли верхня оббивка потребує чищення.

Навіть для дуже великих пацієнтів

Конструкція коляски забезпечує безпечне транспортування пацієнтів вагою до 90 кг.

Пневматичні колеса

Трубчасті шини з двоточковими гальмами гарантують, що коляска буде зупинена на паркеті та бездоріжжі та безпечно знерухоплена.

Доступні кольори



Comfort


МЕТА



	Коляски для дітей				Коляски для дорослих			
	Baby [1]	Size [3]	Size [4]	Size [5]	Size [6]	Size [6+]	Size [7]	Size [8]
Призначення коляски								
Приблизний вік пацієнта	2 - 6	3 - 6	6 - 12	6 - 14	від 14	від 14	від 14	від 14
Максимальна вага пацієнта [кг]	30	35	50	50	75	75	90	130
Зріст пацієнта [см]	115	140	145	155	150 - 165	160 - 180	160 - 180	160 - 180
Параметри коляски								
Ширина сидіння [см]	33,5	35	38	38	41	41	44,5	52,5
Довжина/глибина сидіння [см]	27	33	37	41	45	48	48	48
Висота спинки [см]	55	66,5	70	76,5	78	83	83	83
Максимальний кут нахилу спинки відносно сидіння [°] стандартне положення	до 130°	до 135°	до 130°	до 135°	до 130°	до 130°	до 130°	до 130°
Діапазон регулювання висоти підніжки [см]	23 - 26	27,5 - 33,5	31,5 - 42	32 - 42,5	36 - 46	36 - 46	36,5 - 46,5	36,5 - 46,5
Максимальний кут відкриття підставки для ніг відносно сидіння [°]	110°-155°	110°-145°	110°-135°	95°-135°	100° - 140°	95° - 150°	90° - 130°	90° - 130°
Приблизна вага коляски [кг]	15	21	23	23	26,2	26,5	28	32
Розміри коляски у складеному стані (довжина x ширина x висота) [см]	97,5 x 55 x 50,5	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54	122 x 70 x 54
Розміри коляски у розкладеному стані (довжина x ширина x висота) [см]	111 x 55 x 92	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95	148 x 70 x 95



УСТАТКУВАННЯ

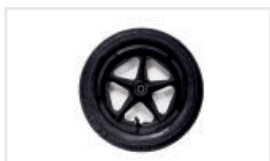


Колесо
(Cat. no.: ST)



Ремені безпеки
(Cat. no.: ACPASBEZPR)



Подвійна оббивка
(Cat. no.: ACTAPW)

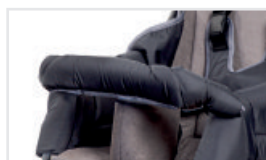

Ручка обмежувач
(Cat. no.: ACBAR)



Абдуктор
(утримуючий)
(Cat. no.: ACKLIN)



Сумка під коляскою
(Cat. no.: ACTORPWW)



Підголівник
(Cat. no.: ACZAG)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ



Цілісні поворотні колеса
(Cat. no.: SK1)



Регульована ручка
(Cat. no.: RL)



Спинка адаптована до вигину хребта(вправо/вліво)
(Cat. no.: ACTAPG)



Захист від перекидання
(Cat. no.: ACUPP)



Спинка з можливістю налаштування лежачого положення
(Cat. no.: OL)



Підвищені підлокітники
(Cat. no.: PP)

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ



Козирок з накидкою
(Cat. no.: BUDA)



Ремені на стегна
(Cat. no.: ACPASU)



Дошовик
(Cat. no.: ACPEL)



Бічні подушки
(Cat. no.: ACPODUB)



Чохол для ніг
(Cat. no.: ACŚPI)



Поперекові опори
(Cat. no.: ACPODPL)



Парасолька
(Cat. no.: PARASOL.KOL.)



Поперекова подушка
(Cat. no.: ACPODUL)



Столик
(Cat. no.: ACSTOL)



Подушка для сидіння
(Cat. no.: ACPODUS)



Сумка на ручку
(Cat. no.: TORBA.KOL.)



Верхня оббивка
(Cat. no.: ACTAPW)



Захист на ручці
(Cat. no.: ACOCHRAС)



Захист для підніжки
(Cat. no.: ACOCHPOD)



Ремені на гомілки
(Cat. no.: ACPASŁ)



Ремені для гомілковостопного суглоба
(Cat. no.: ACPASK)



Ремені для стоп
(Cat. no.: ACPASS)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Ми запрошуємо вас використовувати електронну медіатеку та стежити за нашими соціальними мережами



YouTube

Відеоканал Comfort

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ



Facebook

Профіль бренду, що інформує про нові продукти, поточну діяльність компанії та благодійну діяльність

facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073



Instagram


Профіль зображень, що показує використання колясок, використання аксесуарів та функціональних рішень

instagram.com/comfortpolska




ТАБЛИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ

Як правильно виміряти користувача? Щоб вибрати правильний розмір коляски, необхідно врахувати вимірювання користувача.

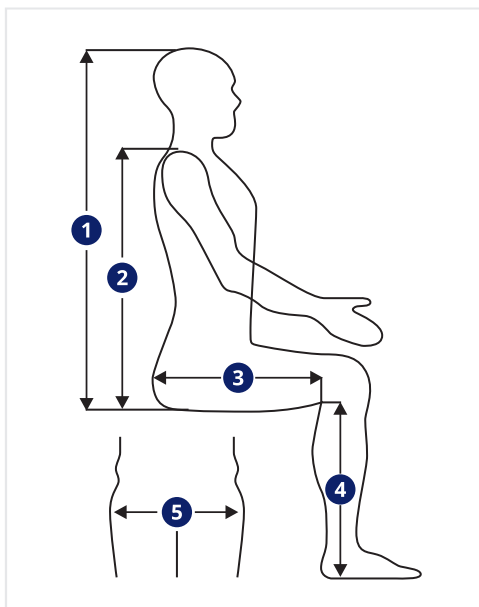

5 вимірів є вирішальними:

- ❶ Довжина тіла від сидіння до маківки
- ❷ Довжина тіла від сидіння до плечей
- ❸ Довжина тіла від стегон до підколінної ямки
- ❹ Довжина ноги (від підколінної ямки до ступні/підшви)
- ❺ Стегна (відстань між найширшими точками)

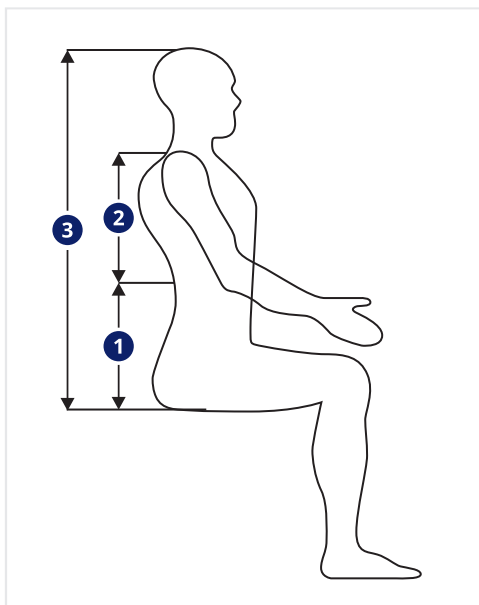

Якщо є горб, то треба точне визначення розмірів.

- ❶ Поперекова довжина
- ❷ Довжина горба від плечей до кінця його прояву
- ❸ Довжина тіла від сидіння до маківки

Крім того, слід вказати, лівобічний горб чи правобічний.

Love. Care. Comfort.

Comfort

WSR COMFORT sp. z o. o.

ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań, Poland
www.comfort-reha.com.ua

ТОВ НВЦ «АНТЕЙ ЛТД»

03062 м.Київ, вул. Екскаваторна, 24
т.ф. 044-400-11-67
т.моб. 050-311-24-71
т.моб. 050 311 24 99
e-mail anteymm@gmail.com
anteymm.com.ua

ТОВ "ЛІДЕР-ОРТО"

79020, м. Львів, вул. Варшавська, 136
тел: +38 (097) 973 30 30
+38 (095) 798 66 59
e-mail: liderorto@gmail.com
liderorto.com.ua