

Comfort[®]

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**Sillas de ruedas de
descanso especializadas
para niños y adultos**



Love. Care. Comfort.

Este es un producto médico. Debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso o con lo que indique la etiqueta.

Care. Comfort. En la práctica.

El cuidado del usuario comienza con un diseño bien pensado. Por eso, en las sillas de ruedas Comfort combinamos comodidad, seguridad, funcionalidad y un enfoque individualizado con la experiencia adquirida durante más de 40 años.



Fiabilidad

Más de 40 años de experiencia, junto con nuestras propias instalaciones de diseño y producción en Polonia, nos permiten mantener un control total sobre la calidad de cada silla de ruedas.



Comodidad

El asiento ergonómico y el reposacabezas profundo y regulable favorecen la propiocepción y ayudan al usuario a mantener una posición estable y cómoda.



Asistencia

Ayudamos a elegir el modelo y el equipamiento adecuados, apoyamos a nuestros colaboradores y garantizamos un servicio técnico eficiente.



Personalización

Adaptamos la silla de ruedas no solo a la estatura y el peso corporal, sino también a las necesidades individuales de cada usuario.



Seguridad

El freno de pie, la barra de seguridad y la cuña de abducción ayudan a evitar que el usuario se deslice fuera del asiento.



Funcionalidad

El ajuste del respaldo y del reposapiés facilita la adaptación de la silla de ruedas a las necesidades individuales del usuario.

Empezamos por una conversación

En Comfort no partimos de una solución predeterminada, sino de una conversación – con el usuario, su cuidador o nuestro socio comercial. Queremos comprender bien las necesidades y los retos del día a día para ofrecer una solución que realmente responda a ellos.



Desde hace más de 40 años desarrollamos nuestros productos basándonos en la experiencia de usuarios, profesionales y distribuidores.

Sus comentarios nos ayudan a perfeccionar nuestras sillas de ruedas y a crear soluciones que responden a necesidades reales.

Combinamos la experiencia del fabricante con el conocimiento local de nuestros distribuidores, manteniéndonos cerca de nuestros clientes en diferentes mercados. También apoyamos a fundaciones e iniciativas que trabajan en favor de las personas con discapacidad y sus cuidadores.

Comfort

TRIP

Los desplazamientos frecuentes al colegio, al médico o a sesiones de rehabilitación pueden implicar tener que trasladar continuamente al usuario de la silla de ruedas al asiento del vehículo y viceversa. Cada uno de estos traslados requiere tiempo y supone un esfuerzo físico tanto para el cuidador como para el usuario.

¿Y si ya disponéis de un vehículo adaptado para el transporte de personas con discapacidad, pero la silla de ruedas que utilizáis no ha sido diseñada ni sometida a las pruebas necesarias para transportar al usuario sentado en ella?

Comfort TRIP combina dos funciones en una sola solución: una silla de ruedas especializada para el uso diario y una silla de ruedas preparada para el transporte del usuario en un vehículo debidamente adaptado.



Cumplimiento de la norma ISO 7176-19:2022



Las pruebas dinámicas de impacto confirman que la silla de ruedas cumple los requisitos de la norma ISO 7176-19:2022 en condiciones de un impacto frontal simulado.

Fijación de cuatro puntos




Dos puntos de fijación delanteros y dos traseros permiten asegurar la silla de ruedas mediante un sistema de fijación de cuatro puntos conforme a la norma ISO 10542-1.

Versatilidad de uso

Es adecuada para el transporte, el hogar, la escuela, la rehabilitación y los desplazamientos.

Chasis reforzado

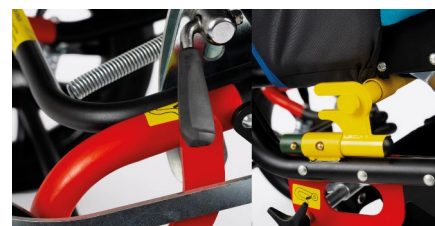

Diseñada para soportar las fuerzas que actúan sobre la silla de ruedas durante el frenado y en diferentes situaciones de tráfico.

Amplio equipamiento

Las ruedas delanteras giratorias facilitan las maniobras, el manillar plegable reduce la longitud de la silla de ruedas, lo que facilita su colocación en el vehículo y el respaldo reclinable permite al usuario adoptar una posición tumbada.

Especificaciones técnicas

Tamaño	3	4	5	6	6+	7
USUARIO						
Edad orientativa del usuario [años]	3-6	6-12	6-14	a partir de 14	a partir de 14	a partir de 14
Peso máximo del usuario [kg]	35	50	50	75	75	90
Estatura máxima del usuario [cm]	140	145	155	155-165	160-180	160-180
ASIENTO						
Anchura del asiento [cm]	35	38	38	41	41	44,5
Longitud del asiento [cm]	33	37	41	45	48	48
Altura del respaldo [cm]	66,5	70	76,5	78	83	83
Ángulo máximo de apertura del respaldo respecto al asiento [°]	hasta 150	hasta 145	hasta 150	hasta 140	hasta 140	hasta 140
REGULACIÓN						
Rango de ajuste de la altura del reposapiés [cm]	27,5-33,5	31,5-42	32-42,5	36-46	36-46	36,5-46,5
Ángulo de apertura del reposapiés respecto al asiento [°]	110-145	100-135	95-135	100-140	95-150	90-130
PARÁMETROS						
Peso aproximado de la silla de ruedas [kg]	24	26	26	29,2	29,5	31
Dimensiones de la silla de ruedas plegada largo x ancho x alto [cm]	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54
Dimensiones de la silla de ruedas desplegada largo x ancho x alto [cm]	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95

Opciones de colores disponibles



Escanea el código QR
y descubre más



Comfort

Easy Vero

Hace unos años, trasladar al usuario de la silla de ruedas a la cama, al sofá o a la bañera no suponía un gran problema. Sin embargo, ¿con el tiempo, a medida que ha ido creciendo y aumentando su peso corporal, las transferencias se han convertido en un esfuerzo mayor para vosotros?

¿Quizás el cuidado diario del usuario requiere un acceso fácil y cómodo que se ve limitado por los laterales fijos de la silla de ruedas?

Comfort Easy Vero es una silla de ruedas de rehabilitación especializada que combina la funcionalidad, la calidad y la resistencia características de las sillas de ruedas Comfort con la posibilidad de desmontar fácilmente los laterales, lo que facilita las transferencias y el cuidado del usuario.



Estructura abierta




Los laterales desmontables y la estructura abierta facilitan los traslados, el cambio de posición y las tareas de cuidado.

Compatibilidad con grúas de transferencia



La estructura abierta de la silla de ruedas facilita los traslados mediante el uso de diversos tipos de grúas de transferencia especializadas.

Cuña Click

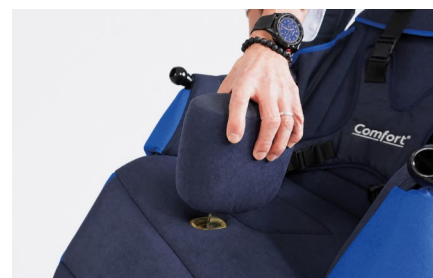

Cuña abductora con un mecanismo que permite un montaje y desmontaje rápido y sencillo.

Fácil plegado y transporte

La silla de ruedas se pliega fácilmente y cabe sin problemas en el maletero incluso de un turismo pequeño.

Especificaciones técnicas

Tamaño	3	4	5	6	6+	7	8
USUARIO							
Edad orientativa del usuario [años]	3-6	6-12	6-14	a partir de 14	a partir de 14	a partir de 14	a partir de 14
Peso máximo del usuario [kg]	35	50	50	75	75	90	130
Estatura máxima del usuario [cm]	140	145	155	150-165	160-180	160-180	160-180
ASIENTO							
Anchura del asiento [cm]	35	38	38	41	41	44,5	52,5
Longitud del asiento [cm]	33	37	41	45	48	48	48
Altura del respaldo [cm]	66,5	70	76,5	78	83	83	83
Ángulo máximo de apertura del respaldo respecto al asiento [°]	hasta 135-150	hasta 130-145	hasta 135-150	hasta 120-140	hasta 120-140	hasta 120-140	hasta 120-140
REGULACIÓN							
Rango de ajuste de la altura del reposapiés [cm]	27,5-33,5	31,5-42	32-42,5	36-46	36-46	36,5-46,5	36,5-46,5
Ángulo de apertura del reposapiés respecto al asiento [°]	110-145	100-135	95-135	100-140	95-150	90-130	90-130
PARÁMETROS							
Peso aproximado de la silla de ruedas [kg]	22	24	24	27,2	27,5	29	33
Dimensiones de la silla de ruedas plegada largo x ancho x alto [cm]	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54	122 x 78 x 95
Dimensiones de la silla de ruedas desplegada largo x ancho x alto [cm]	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95	148 x 78 x 95

Opciones de colores disponibles



Z04



Z16



Z18

Escanea el código QR
y descubre más



Silla de ruedas especial Comfort

Baby

Elegir una de las primeras sillas de ruedas especializadas para vuestro hijo es una decisión importante. Además de proporcionarle un apoyo adecuado, también es importante garantizar la comodidad de los cuidadores. La silla de ruedas debe ser fácil de manejar y plegar, debe caber sin problemas en el maletero del coche y tiene que ser fácil de mantener limpia. ¿Buscáis una solución ligera y compacta, diseñada pensando en los usuarios más pequeños y que, al mismo tiempo, facilite vuestro día a día?

Comfort Baby es el modelo más pequeño de la gama Comfort, diseñado para los usuarios más pequeños que necesitan un apoyo adecuado para la cabeza, el tronco y las extremidades. Su diseño ayuda a proporcionar al niño una posición estable y cómoda, mientras que la amplia variedad de accesorios permite adaptar la silla de ruedas a las necesidades individuales del usuario.



Diseño compacto



La silla de ruedas se pliega fácilmente y cabe sin problemas en el maletero incluso de un turismo pequeño.

Manillar articulado



Permite ajustar la altura del manillar a la estatura del cuidador, proporcionando una conducción más cómoda de la silla de ruedas.

Respaldo reclinable hasta la posición horizontal



Ruedas macizas giratorias

Facilitan las maniobras en interiores y durante los paseos y, gracias a sus neumáticos macizos, eliminan el riesgo de pinchazos.

Tapizado fácil de limpiar

El material utilizado facilita la eliminación de la suciedad diaria.

El respaldo se puede reclinarse hasta la posición horizontal, proporcionando al niño una posición cómoda durante el descanso.

Especificaciones técnicas

Tamaño	1
USUARIO	
Edad orientativa del usuario [años]	0-3
Peso máximo del usuario [kg]	30
Estatura máxima del usuario [cm]	110
ASIENTO	
Anchura del asiento [cm]	33,5
Longitud del asiento [cm]	27
Altura del respaldo [cm]	55
Ángulo máximo de apertura del respaldo respecto al asiento [°]	hasta 130-150
REGULACIÓN	
Rango de ajuste de la altura del reposapiés [cm]	23-26
Ángulo de apertura del reposapiés respecto al asiento [°]	110-155
PARÁMETROS	
Peso aproximado de la silla de ruedas [kg]	15
Dimensiones de la silla de ruedas plegada largo x ancho x alto [cm]	97,5 x 55 x 50,5
Dimensiones de la silla de ruedas desplegada largo x ancho x alto [cm]	111 x 55 x 92

Opciones de colores disponibles



Escanea el código QR
y descubre más



Silla de ruedas especial Comfort

Vario

El día a día del usuario no se limita a un solo lugar. La silla de ruedas debe proporcionarle una posición cómoda y estable en casa, en la ciudad y durante los paseos, incluso en terrenos más exigentes. Al mismo tiempo, debe responder a las necesidades individuales relacionadas con la constitución corporal y el nivel de estabilización requerido. ¿Buscáis una silla de ruedas versátil, adaptada a las necesidades del usuario?

Comfort Vario es la línea de sillas de ruedas más versátil de Comfort, reconocida por su funcionalidad, calidad de fabricación y resistencia. Está disponible en una amplia gama de tamaños, adaptados a las necesidades tanto de usuarios de menor como de mayor tamaño. Las amplias posibilidades de personalización permiten adaptar aún más la silla de ruedas a las necesidades individuales de la persona que la utiliza.



Tapizado anatómico



Favorece la propiocepción y una posición estable, proporcionando comodidad durante un uso prolongado.

Tapizado doble



Permite utilizar la silla de ruedas incluso cuando el tapizado exterior debe retirarse para su limpieza.

Amplias posibilidades de personalización



La amplia selección de accesorios y soluciones personalizadas permite adaptar la silla de ruedas a las necesidades del usuario y del cuidador.

Regulación de la posición

El amplio rango de regulación del ángulo del respaldo y del reposapiés permite adaptar la silla de ruedas a las necesidades individuales del usuario.

Amplia gama de tamaños

La silla de ruedas está disponible en una amplia variedad de tamaños, por lo que se adapta tanto a usuarios de menor como de mayor tamaño.

Especificaciones técnicas

Tamaño	3	4	5	6	6+	7
USUARIO						
Edad orientativa del usuario [años]	3-6	6-12	6-14	a partir de 14	a partir de 14	a partir de 14
Peso máximo del usuario [kg]	35	50	50	75	75	90
Estatura máxima del usuario [cm]	140	145	155	150-165	160-180	160-180
ASIENTO						
Anchura del asiento [cm]	35	38	38	41	41	44,5
Longitud del asiento [cm]	33	37	41	45	48	48
Altura del respaldo [cm]	66,5	70	76,5	78	83	83
Ángulo máximo de apertura del respaldo respecto al asiento [°]	hasta 135-150	hasta 130-145	hasta 135-150	hasta 120-140	hasta 120-140	hasta 120-140
REGULACIÓN						
Rango de ajuste de la altura del reposapiés [cm]	27,5-33,5	31,5-42	32-42,5	36-46	36-46	36,5-46,5
Ángulo de apertura del reposapiés respecto al asiento [°]	110-145	100-135	95-135	100-140	95-150	90-130
PARÁMETROS						
Peso aproximado de la silla de ruedas [kg]	21	23	23	26,2	26,5	28
Dimensiones de la silla de ruedas plegada largo x ancho x alto [cm]	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54
Dimensiones de la silla de ruedas desplegada largo x ancho x alto [cm]	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95

Opciones de colores disponibles



Escanea el código QR
y descubre más



Silla de ruedas especial Comfort

Spazio

Un usuario de mayor tamaño necesita un espacio y una capacidad de carga adecuados, pero no debería tener que renunciar a un apoyo estable. Encontrar una silla de ruedas pasiva que combine todas estas características suele ser un gran desafío. ¿Buscáis una silla de ruedas especializada que proporcione a un usuario de mayor tamaño el espacio adecuado, comodidad y una posición estable?

Comfort Spazio es el modelo más grande de la familia de sillas de ruedas especializadas Comfort. No es simplemente una versión ampliada de la línea Vario – hemos adaptado su estructura para soportar mayores cargas y responder a las necesidades de los usuarios de mayor tamaño, manteniendo la estabilidad, la funcionalidad y amplias posibilidades de personalización.



Chasis reforzado



Especialmente adaptado para usuarios con un peso de hasta 130 kg.

Asiento espacioso



El asiento, con una anchura de hasta 52,5 cm, proporciona un espacio cómodo para los usuarios que necesitan más amplitud.

Tapizado anatómico



Favorece la propiocepción y una posición estable, proporcionando comodidad durante un uso prolongado.

Estabilización corporal

El reposacabezas profundo y regulable, los cinturones y los elementos adicionales de apoyo ayudan a mantener la cabeza, el tronco y las extremidades en la posición adecuada.

Amplias posibilidades de personalización

La amplia selección de accesorios y soluciones personalizadas permite adaptar la silla de ruedas a las necesidades individuales del usuario.

Especificaciones técnicas

Tamaño	8
USUARIO	
Edad orientativa del usuario [años]	a partir de 14
Peso máximo del usuario [kg]	130
Estatura máxima del usuario [cm]	160-180
ASIENTO	
Anchura del asiento [cm]	52,5
Longitud del asiento [cm]	48
Altura del respaldo [cm]	83
Ángulo máximo de apertura del respaldo respecto al asiento [°]	hasta 120-140
REGULACIÓN	
Rango de ajuste de la altura del reposapiés [cm]	36,5-46,5
Ángulo de apertura del reposapiés respecto al asiento [°]	90-130
PARÁMETROS	
Peso aproximado de la silla de ruedas [kg]	32
Dimensiones de la silla de ruedas plegada largo x ancho x alto [cm]	122 x 78 x 95
Dimensiones de la silla de ruedas desplegada largo x ancho x alto [cm]	148 x 78 x 95

Opciones de colores disponibles



Escanea el código QR
y descubre más



Comfort

Coala

En personas con parálisis cerebral infantil y otras enfermedades neurológicas pueden presentarse una espasticidad muy intensa, una marcada flacidez muscular o una hipotonía extrema acompañada de falta de control de la cabeza. En algunos usuarios también puede aparecer una rigidez corporal persistente de tipo en bloc, especialmente en la zona de la pelvis, las articulaciones de las extremidades inferiores y la columna vertebral.

Cuando estas alteraciones tienen un carácter permanente, puede resultar imposible adoptar y mantener una posición sentada o semisentada.

¿Buscáis una solución que permita a este usuario permanecer fuera de la cama también en posición horizontal?

Comfort Coala es una silla de ruedas de rehabilitación especializada diseñada para usuarios que permanecen principalmente en posición horizontal.



Regulación del respaldo



El respaldo se puede regular en un rango de 150-180°, lo que permite elevar la parte superior del cuerpo y adaptar la posición a las necesidades del usuario.

Estantes para equipos médicos



Proporcionan espacio para el equipo médico necesario, como un respirador o un aspirador.

Asiento desmontable



El asiento se puede separar del chasis y las asas facilitan su transporte.

Amplio equipamiento

Las ruedas delanteras giratorias facilitan las maniobras, mientras que el manillar plegable reduce la longitud de la silla de ruedas para su transporte.

Patas estabilizadoras

Las patas desplegables proporcionan una mayor estabilidad a la silla de ruedas durante las paradas.

Especificaciones técnicas

Tamaño	9
USUARIO	
Edad orientativa del usuario [años]	-
Peso máximo del usuario [kg]	75
Estatura máxima del usuario [cm]	180
ASIENTO	
Anchura del asiento [cm]	45
Longitud del asiento [cm]	100
Altura del respaldo [cm]	40
Ángulo máximo de apertura del respaldo respecto al asiento [°]	hasta 180
REGULACIÓN	
Rango de ajuste de la altura del reposapiés [cm]	-
Ángulo de apertura del reposapiés respecto al asiento [°]	-
PARÁMETROS	
Peso aproximado de la silla de ruedas [kg]	39
Dimensiones de la silla de ruedas plegada largo x ancho x alto [cm]	150 x 58 x 20
Dimensiones de la silla de ruedas desplegada largo x ancho x alto [cm]	170 x 78 x 90

Opciones de colores disponibles



Z16



Escanea el código QR
y descubre más



Opciones de colores disponibles

Puedes elegir el tapizado entre las opciones de color disponibles, según tus preferencias individuales. La disponibilidad de los colores depende del modelo – encontrarás más información en la descripción de cada silla de ruedas del catálogo.

Azul marino [Z-01]



Azul marino [Z-04]



Azul marino con motivo de tucanes [Z-06]



Gris ceniza y turquesa [Z-09]



Gris ceniza y naranja [Z-11]



Azul marino y rojo [Z-12]



Gris ceniza y rojo [Z-13]



Gris ceniza [Z-16]



Negro [Z-18]



Accesorios

Respaldo adaptado para
cifosis [ACTAPG]



Estantes para aspirador
[ACPPSS]




Respaldo reclinable hasta la
posición horizontal o semir-
reclinada [OL]



Estantes para
respirador [ACPPRES]



Reposabrazos
elevados [PP]

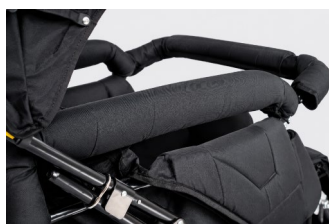


Protector para el
reposapiés [COCHPOD]



Protector para el
manillar [ACOHRAC]



Correas para las
pantorrillas [ACPASL]

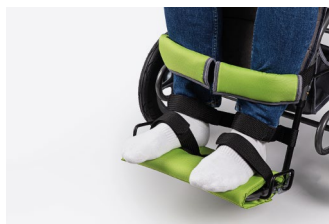

Correas para los pies
[ACPASS]



Correas para los muslos
[ACPASU]



Correas para los tobillos
[ACPASK]



Soportes lumbar -
pelotas [ACPELOT]



Cojín lumbar
[ACPODUL]



Cojín para el asiento
[ACPODUS]



Cojines laterales
[ACPODUB]




Pelotas laterales
[UCHW.PEL]



Mesa
[ACSTOL]



Cuña abductora de montaje
rápido [KLIN.AB.SZ.MON]

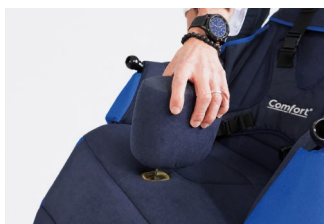

Accesorios

Ruedas delanteras giratorias
[SK1]



Manillar regulable
[RL]



Bolsa para el manillar
[TORBA.KOL]



Grúa Helios 150
[PHEL]




Dispositivo antivuelco
[ACUPP]



Sombrilla
[PARASOL.KOL]



Saco de dormir
[ACSPI]

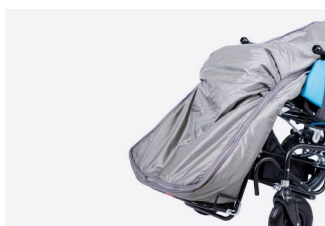

Capota con faldón
[BUDA]



Capa impermeable
[ACPEL]




Cojín ortopédico ComfortMemo (tamaños S, M, L)
[ACPODZPAM]




Cojín estabilizador en forma de L (tamaños S, M, L)
[POD-L-STAB]




Rueda con cámara
[ACKST4]

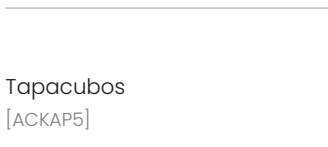


Rueda sin cámara
[ACKST5]

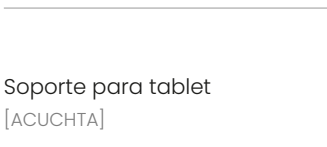


Cámara - tamaño a elegir [ACDET]

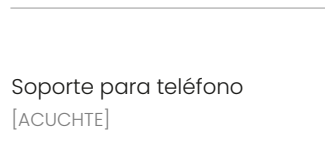


Neumático para rueda
[ACOP12CZ]

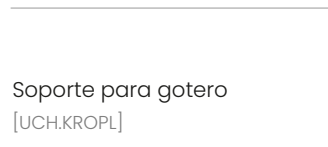


Tapacubos
[ACKAP5]

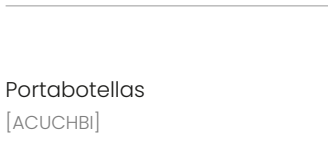


Soporte para tablet
[ACUCHTA]

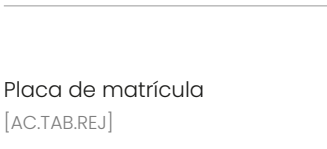


Soporte para teléfono
[ACUCHTE]

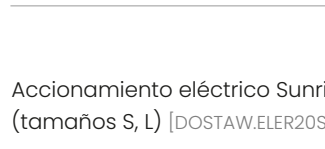


Soporte para gotero
[UCH.KROPL]

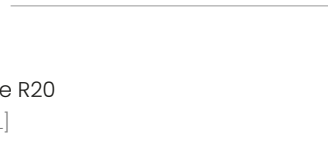


Portabotellas
[ACUCHBI]

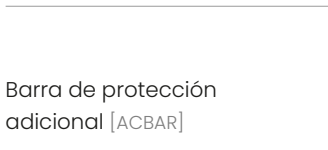


Placa de matrícula
[AC.TAB.REJ]

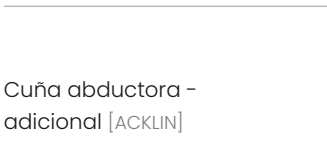


Accionamiento eléctrico Sunrise R20 (tamaños S, L) [DOSTAW.ELER20S/L]

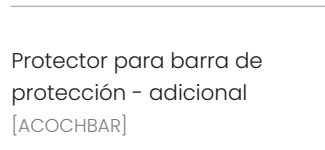


Barra de protección adicional [ACBAR]

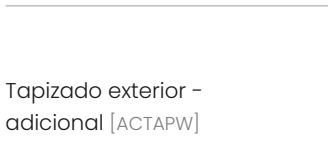


Cuña abductora - adicional [ACKLIN]

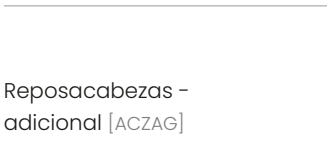

Protector para barra de protección - adicional [ACOCBAR]

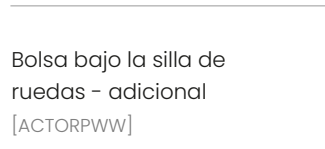

Cinturón de seguridad de cuatro puntos - adicional [ACPASBEZPR]



Tapizado exterior - adicional [ACTAPW]



Reposacabezas - adicional [ACZAG]



Bolsa bajo la silla de ruedas - adicional [ACTORPWW]




Elige el tamaño adecuado de la silla de ruedas

Para elegir correctamente el tamaño de la silla de ruedas, realiza las mediciones del usuario siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.




Las mediciones deben realizarse preferiblemente con el usuario sentado en su posición natural. Unas medidas precisas permiten elegir correctamente el tamaño y la configuración de la silla de ruedas.

Para elegir el tamaño adecuado de la silla de ruedas, serán necesarias cuatro mediciones:

1. Longitud del tronco desde el asiento hasta la parte superior de la cabeza
2. Longitud desde la espalda hasta el hueco poplíteo
3. Longitud de la pierna desde el hueco poplíteo hasta la planta del pie
4. Anchura de las caderas

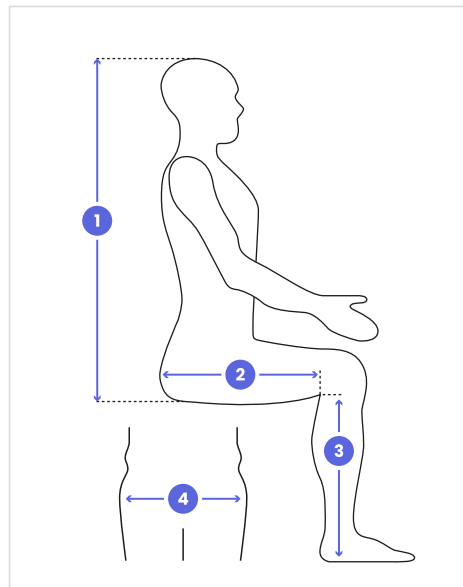

En caso de presentar una joroba, son necesarias mediciones adicionales:

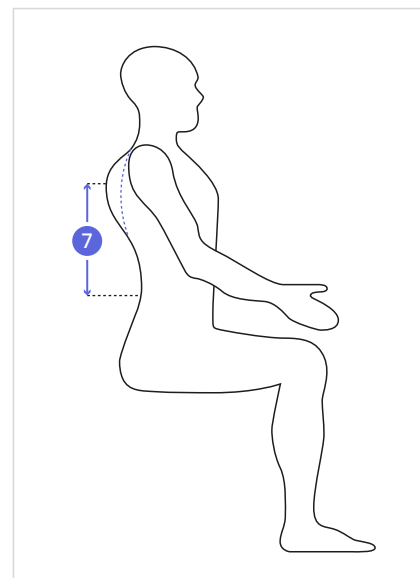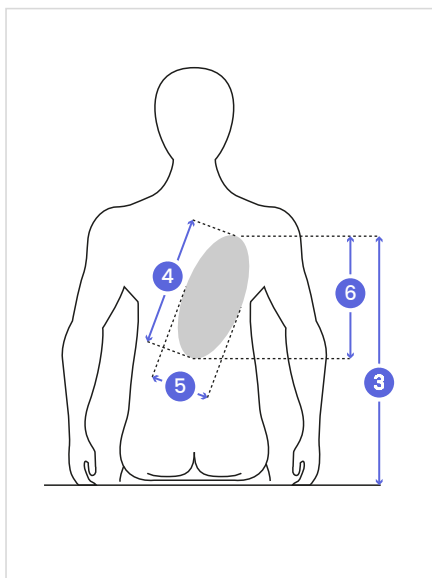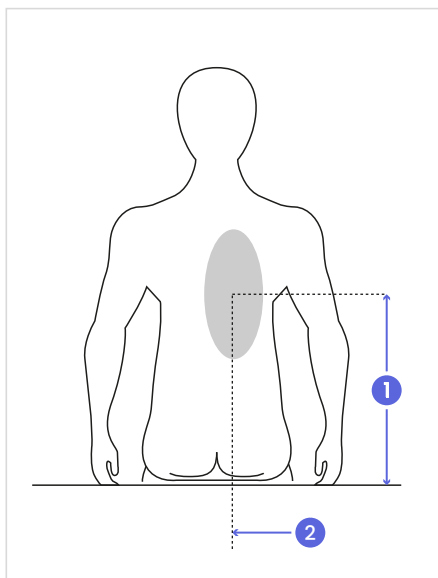

1. Posición vertical del punto más alto de la joroba
2. Posición horizontal del punto más alto de la joroba
3. Punto más alto de la base de la joroba
4. Longitud de la joroba
5. Anchura de la joroba
6. Distancia vertical entre los puntos extremos de la joroba
7. Altura del punto más alto de la joroba

WSR Comfort sp. z o.o.

ul. Głazowa 43
60-116 Poznań
tel. +48 61 863 85 61
biuro@comfort-reha.pl
www.comfort-reha.pl



Silla de ruedas especial Comfort. Diseñada para facilitar el desplazamiento de niños y adultos con parálisis cerebral y otras patologías que les impiden desplazarse de forma autónoma. La silla de ruedas requiere ser manejada por un cuidador.

Comfort Baby, Vario y Spazio no constituyen nombres comerciales en el sentido del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios. Comfort Baby, Vario y Spazio son marcas de productos que cumplen exclusivamente una función de marketing.