

Comfort[®]

PRODUKTOVÝ KATALOG

**Speciální
odlehčovací kočárky
pro děti i dospělé**



Love. Care. Comfort.

**Jedná se o zdravotnický prostředek. Používejte
jej v souladu s návodem k použití.**

Care. Comfort. V praxi.

Péče o uživatele začíná promyšleným designem. Proto kočárky Comfort spojují pohodlí, bezpečnost, funkčnost a individuální přístup s více než 40 lety zkušeností.



Spolehlivost

Díky více než 40 letům zkušeností a vlastnímu výrobnímu a konstrukčnímu oddělení v Polsku máme plnou kontrolu nad kvalitou každého kočárku.



Pohodlí

Pohodlná sedadla a nastavitelné opěrky hlavy zajišťují komfort a stabilní oporu pro hlavu a krk.



Podpora

Pomáháme s výběrem vhodného modelu a vybavení, podporujeme naše partnery a zajišťujeme efektivní servis.



Individuální přístup

Kočárek přizpůsobujeme nejen výšce a váze uživatele, ale také jeho individuálním potřebám.



Bezpečnost

Nožní brzda, bezpečnostní tyč a abdukční klín pomáhají zajistit bezpečnost uživatele a snižují riziko vyklouznutí.



Funkčnost

Díky nastavitelnému opěradlu a opěrce nohou lze kočárek snadněji přizpůsobit individuálním potřebám uživatele.

Začínáme rozhovorem

Ve společnosti Comfort nevycházíme z hotového řešení. Začínáme rozhovorem – s uživatelem, pečovatelem nebo naším obchodním partnerem. Chceme porozumět každodenním potřebám a výzvám, abychom mohli navrhnout řešení, které je skutečně vyřeší.



Již více než 40 let vyvíjíme naše výrobky na základě podnětů od uživatelů, zdravotnických pracovníků a distributorů.

Jejich zpětná vazba nám pomáhá vylepšovat naše kočárky a vyvíjet řešení vycházející z každodenních zkušeností.

Spojujeme naše zkušenosti jako výrobce s místními znalostmi našich distributorů, což nám umožňuje být v úzkém kontaktu se zákazníky na různých trzích. Podporujeme také nevládní organizace a projekty zaměřené na pomoc lidem se zdravotním postižením a jejich pečovatelům.

Comfort

TRIP

Časté cestování s sebou často přináší opakované přenášení dítěte z kočárku do autosedačky. To zabírá čas a může být fyzicky náročné jak pro uživatele, tak pro pečovatele.

Možná již vlastníte vozidlo upravené pro přepravu osob se zdravotním postižením, ale kočárek, který používáte, nebyl navržen ani testován pro přepravu uživatele, který v něm zůstává?

Comfort TRIP spojuje dvě funkce do jednoho řešení: specializovaný kočárek pro každodenní použití, který je zároveň určen k přepravě uživatele v vozidle přizpůsobeném pro osoby se zdravotním postižením.



V souladu s ISO 7176-19:2022



Dynamické nárazové zkoušky potvrzují, že kočárek splňuje výkonnostní požadavky normy ISO 7176-19:2022 za simulovaných podmínek čelního

Čtyřbodové upevnění



Dva upevňovací body vpředu a dva vzadu umožňují kočárek bezpečně upevnit pomocí čtyřbodového upevňovacího systému, který splňuje normu ISO 10542-1.

Všestranné využití

Vhodné jak pro přepravu vozidlem, tak pro každodenní použití doma, ve škole i při rehabilitaci.

Zesílený rám



Navrženo tak, aby odolávalo silám působícím na kočárek při brzdění a v dalších situacích na silnici.

Hlavní vlastnosti

Otočná přední kola usnadňují manévrování, sklopná rukojeť zmenšuje celkovou délku kočárku, díky čemuž se snáze vejde do auta, zatímco sklopné opěradlo umožňuje uživateli si lehnout.

Technické parametry

Velikost	3	4	5	6	6+	7
UŽIVATEL						
Přibližný věk uživatele [v letech]	3–6	6–12	6–14	od 14	od 14	od 14
Max. hmotnost uživatele [kg]	35	50	50	75	75	90
Max. výška uživatele [cm]	140	145	155	155–165	160–180	160–180
SEDADLO						
Šířka sedadla [cm]	35	38	38	41	41	44,5
Délka sedadla [cm]	33	37	41	45	48	48
Výška opěradla [cm]	66,5	70	76,5	78	83	83
Max. úhel mezi opěradlem a sedákem [stupně]	až do 150	až do 145	až do 150	až do 140	až do 140	až do 140
ÚPRAVA						
Rozsah nastavení výšky opěrky nohou [cm]	27,5–33,5	31,5–42	32–42,5	36–46	36–46	36,5–46,5
Úhel mezi opěrkou nohou a sedákem [deg]	110–145	100–135	95–135	100–140	95–150	90–130
PARAMETRY						
Přibližná hmotnost kočárku [kg]	24	26	26	29,2	29,5	31
Rozměry kočárku ve složeném stavu D x Š x V [cm]	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54
Rozměry kočárku v rozloženém stavu D x Š x V [cm]	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95

Dostupné barevné varianty



Naskenujte QR kód a dozvíte se



Comfort

Easy Vero

Ještě před několika lety možná nebylo přenášení uživatele z kočárku na postel, pohovku nebo do vany nijak zvlášť náročné. Ale jak uživatel vyrostl a přibral na váze, staly se tyto přesuny fyzicky náročnější?

Nebo snad každodenní péče vyžaduje snadný a neomezený přístup k uživateli, který pevné boční části ztěžují?

Comfort Easy Vero je speciální rehabilitační kočárek, který kombinuje funkčnost, kvalitu a odolnost typické pro kočárky značky Comfort s snadno odnímatelnými bočnicemi, což usnadňuje přesuny a každodenní péči.



Otevřená konstrukce



Odnímatelné bočnice usnadňují přístup k uživateli, čímž zjednodušují přesuny, změnu polohy a každodenní

Kompatibilní se zvedáky pacientů



Odnímatelné bočnice umožňují snadnější přístup k uživateli a usnadňují přesuny s většinou typů

Rychloupínací abdukční klín



Odklápěcí klín s mechanismem rychlého uvolnění pro snadnou montáž a demontáž.

Snadné skládání a přeprava

Kočárek se snadno složí a vejde se do zavazadlového prostoru i menšího auta.

Technické specifikace

Velikost	3	4	5	6	6+	7	8
UŽIVATEL							
Přibližný věk uživatele [v letech]	3–6	6–12	6–14	od 14	od 14	od 14	od 14
Max. hmotnost uživatele [kg]	35	50	50	75	75	90	130
Max. výška uživatele [cm]	140	145	155	150–165	160–180	160–180	160–180
SEDADLO							
Šířka sedadla [cm]	35	38	38	41	41	44.5	52.5
Délka sedadla [cm]	33	37	41	45	48	48	48
Výška opěradla [cm]	66.5	70	76,5	78	83	83	83
Max. úhel mezi opěradlem a sedákem [stupně]	až do 135–150	až do 130–145	až do 135–150	až do 120–140	až do 120–140	až do 120–140	až do 120–140
ÚPRAVA							
Rozsah nastavení výšky opěrky nohou [cm]	27.5–33.5	31.5–42	32–42.5	36–46	36–46	36.5–46.5	36.5–46.5
Úhel mezi opěrkou nohou a sedákem [stupně]	110–145	100–135	95–135	100–140	95–150	90–130	90–130
PARAMETRY							
Přibližná hmotnost kočárku [kg]	22	24	24	27,2	27,5	29	33
Rozměry kočárku ve složeném stavu D x Š x V [cm]	89.5 x 62 x 55	94 x 64.5 x 51.5	98 x 64.5 x 55	112.5 x 69.5 x 56	122 x 69.5 x 55	122 x 70 x 54	122 x 78 x 95
Rozměry kočárku v rozloženém stavu D x Š x V [cm]	123 x 62 x 96	121.5 x 64.5 x 94.5	122.5 x 64, x 94.5	141 x 69.5 x 95	143 x 69.5 x 95	148 x 70 x 95	148 x 78 x 95

Dostupné barevné varianty



Z04 Z16 Z18

Naskenujte QR
kód a dozvíte se



Specializovaný rehabilitační kočárek

Baby

Výběr prvního speciálního kočárku pro vaše dítě je důležité rozhodnutí. Kromě zajištění správné opory je důležitý také komfort pečovatele.

Kočárek by se měl snadno ovládat a skládat, pohodlně se vejít do kufru auta a měl by se snadno udržovat v čistotě. Hledáte lehké a kompaktní řešení určené pro nejmenší děti, které zároveň usnadní každodenní péči?

Comfort Baby je nejmenší model řady Comfort, určený pro nejmladší uživatele, kteří potřebují odpovídající oporu hlavy, trupu a končetin. Jeho konstrukce pomáhá zajistit dítěti stabilní a pohodlnou polohu, zatímco široká škála příslušenství umožňuje přizpůsobit kočárek individuálním potřebám uživatele.



Kompaktní provedení



Kočárek se snadno složí a vejde se do zavazadlového prostoru i menšího auta.

Nastavitelná rukojeť pro tlačení



Umožňuje nastavení rukojeti tak, aby vyhovovala pečovateli, díky čemuž se s kočárkem pohodlněji manévruje.

Opěradlo se dá sklopit do polohy pro ležení



Umožňuje sklopení opěradla, čímž dítěti zajišťuje pohodlnou polohu k odpočinku.

Pevná otočná kolečka

Usnadněte si manévrování v interiéru i při výletech a díky plným pneumatikám se zbavte rizika defektu.

Čalounění, které se snadno čistí

Díky potahové látce se každodenní nečistoty snáze odstraňují.

Technické parametry

Velikost	1
UŽIVATEL	
Přibližný věk uživatele [v letech]	0-3
Max. hmotnost uživatele [kg]	30
Max. výška uživatele [cm]	110
SEDADLO	
Šířka sedadla [cm]	33.5
Délka sedadla [cm]	27
Výška opěradla [cm]	55
Max. úhel mezi opěradlem a sedákem [stupně]	až do 130-150
ÚPRAVA	
Rozsah nastavení výšky opěrky nohou [cm]	23-26
Úhel mezi opěrkou nohou a sedákem [stupně]	110-155
PARAMETRY	
Přibližná hmotnost kočárku [kg]	15
Rozměry kočárku ve složeném stavu D x Š x V [cm]	97.5 x 55 x 50.5
Rozměry kočárku v rozloženém stavu D x Š x V [cm]	111 x 55 x 92

Dostupné barevné varianty



Naskenujte QR
kód a dozvíte se



Specializovaný rehabilitační kočárek

Vario

Každodenní život vede uživatele různými prostředími – doma, venku i v náročnějším terénu. Dětský kočárek by měl po celou dobu zajišťovat pohodlnou a stabilní polohu a zároveň zohledňovat individuální rozdíly v tělesných proporcích a míru potřebné opory těla.

Hledáte univerzální kočárek, který lze přizpůsobit individuálním potřebám uživatele?

Comfort Vario je naše nejvšestrannější řada kočárků, která se vyznačuje funkčností, kvalitou zpracování a odolností.

Je k dispozici v široké škále velikostí, takže vyhovuje jak menším, tak větším uživatelům. Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení lze tento produkt přizpůsobit potřebám uživatele.



Tvarované čalounění



Podporuje propriocepci a stabilní držení těla, čímž přispívá k pohodlí při dlouhodobém používání.

Dvouvrstvé čalounění



Odnímatelnou horní vrstvu lze sundat za účelem čištění, zatímco pevná spodní vrstva umožňuje kočárek i nadále

Široká škála možností přizpůsobení



Díky širokému výběru příslušenství a řešení na míru lze kočárek přizpůsobit potřebám jak uživatele, tak pečovatele.

Nastavení polohy

Díky nastavitelnému opěradlu a opěrce nohou lze kočárek snadněji přizpůsobit individuálním potřebám uživatele.

Široká škála velikostí

K dispozici v různých velikostech, aby vyhovovaly jak menším, tak větším uživatelům.

Technické parametry

Velikost	3	4	5	6	6+	7
UŽIVATEL						
Přibližný věk uživatele [v letech]	3–6	6–12	6–14	od 14	od 14	od 14
Max. hmotnost uživatele [kg]	35	50	50	75	75	90
Max. výška uživatele [cm]	140	145	155	150–165	160–180	160–180
SEDADLO						
Šířka sedadla [cm]	35	38	38	41	41	44.5
Délka sedadla [cm]	33	37	41	45	48	48
Výška opěradla [cm]	66,5	70	76,5	78	83	83
Max. úhel mezi opěradlem a sedákem [stupně]	až do 135–150	až do 130–145	až do 135–150	až do 120–140	až do 120–140	až do 120–140
ÚPRAVA						
Rozsah nastavení výšky opěrky nohou [cm]	27.5–33.5	31.5–42	32–42.5	36–46	36–46	36.5–46.5
Úhel mezi opěrkou nohou a sedákem [stupně]	110–145	100–135	95–135	100–140	95–150	90–130
PARAMETRY						
Přibližná hmotnost kočárku [kg]	21	23	23	26,2	26.5	28
Rozměry kočárku ve složeném stavu D x Š x V [cm]	89.5 x 62 x 55	94 x 64.5 x 51.5	98 x 64.5 x 55	112.5 x 69.5 x 56	122 x 69.5 x 55	122 x 70 x 54
Rozměry kočárku v rozloženém stavu D x Š x V [cm]	123 x 62 x 96	121.5 x 64.5 x 94.5	122.5 x 64.5 x 94.5	141 x 69.5 x 95	143 x 69.5 x 95	148 x 70 x 95

Dostupné barevné varianty



Naskenujte QR
kód a dozvíte se



Specializovaný rehabilitační kočárek

Spazio

Větší uživatel potřebuje dostatek prostoru a nosnost, aniž by musel slevit ze svých požadavků na stabilní oporu. Najít pasivní kočárek, který v sobě spojuje všechny tyto vlastnosti, může být často velkou výzvou.

Hledáte speciální kočárek, který většímu uživateli poskytne dostatek prostoru, pohodlí a stabilní polohu, jakou potřebuje?

Comfort Spazio je největší model z řady specializovaných kočárků Comfort. Nejedná se pouze o zvětšenou verzi řady Vario – jeho konstrukce byla přizpůsobena pro vyšší zatížení a potřeby větších uživatelů, přičemž si zachovává účinnou podporu správného držení těla, praktickou funkčnost a široké možnosti přizpůsobení.



Zesílený rám



Zvláště přizpůsobeno pro uživatele s hmotností do 130 kg.

Prostorné sedadlo



Šířka sedadla 52.5 cm poskytuje více prostoru uživatelům, kteří potřebují větší sedací plochu.

Tvarované čalounění



Podporuje propriocepci a stabilní držení těla, čímž přispívá k pohodlí i při dlouhodobém používání.

Stabilizace těla

Hluboká, nastavitelná opěrka hlavy, bezpečnostní pásy a další opěrné prvky pomáhají udržovat hlavu, trup a končetiny ve správné poloze.

Široká škála možností přizpůsobení

Díky širokému výběru příslušenství a řešení na míru lze kočárek přizpůsobit potřebám jak uživatele, tak pečovatele.

Technické parametry

Velikost	8
UŽIVATEL	
Přibližný věk uživatele [v letech]	od 14
Max. hmotnost uživatele [kg]	130
Max. výška uživatele [cm]	160–180
SEDADLO	
Šířka sedadla [cm]	52,5
Délka sedadla [cm]	48
Výška opěradla [cm]	83
Max. úhel mezi opěradlem a sedákem [stupně]	až do 120–140
ÚPRAVA	
Rozsah nastavení výšky opěrky nohou [cm]	36,5–46,5
Úhel mezi opěrkou nohou a sedákem [stupně]	90–130
PARAMETRY	
Přibližná hmotnost kočárku [kg]	32
Rozměry kočárku ve složeném stavu D x Š x V [cm]	122 x 78 x 95
Rozměry kočárku v rozloženém stavu D x Š x V [cm]	148 x 78 x 95

Dostupné barevné varianty



Naskenujte QR
kód a dozvíte se



Comfort

Coala

U osob s dětskou mozkovou obrnou a jinými neurologickými poruchami se může vyskytovat závažná spasticita, výrazná svalová ochablost nebo hluboká hypotonie v kombinaci s neschopností udržet hlavu vzpřímenou.

U některých uživatelů se může také vyskytovat přetrvávající celková ztuhlost těla, zejména v oblasti pánve, kloubů dolních končetin a páteře. Pokud tyto příznaky přetrvávají, může být nemožné zaujmout a udržet sedící nebo polosedící polohu.

Hledáte řešení, které by takovému uživateli umožnilo trávit čas mimo postel a přitom zůstat v horizontální poloze?

Comfort Coala je speciální rehabilitační kočárek určený pro uživatele, kteří se převážně nacházejí v horizontální poloze.



Nastavitelné opěradlo



Opěradlo lze nastavit v rozmezí 150°–180°, což umožňuje zvednout horní část těla uživatele a nastavit ji podle jeho potřeb.

Police na zdravotnické vybavení



Prostor pro nezbytné vybavení, jako je ventilátor nebo odsávací jednotka.

Odnímatelné sedadlo



Sedadlo lze z rámu sejmut; díky integrovaným držadlům se snadno přenáší.

Hlavní vlastnosti

Otočná přední kola usnadňují manévrování, zatímco sklopná rukojeť zmenšuje celkovou délku kočárku pro přepravu.

Stabilizační nožičky

Výklopné nožičky zajišťují větší stabilitu, když je kočárek v klidu.

Technické parametry

Velikost	9
UŽIVATEL	
Přibližný věk uživatele [v letech]	-
Max. hmotnost uživatele [kg]	75
Max. výška uživatele [cm]	180
SEAT	
Šířka sedadla [cm]	45
Délka sedadla [cm]	100
Výška opěradla [cm]	40
Max. úhel mezi opěradlem a sedákem [stupně]	až do 180
ÚPRAVA	
Rozsah nastavení výšky opěrky nohou [cm]	-
Úhel mezi opěrkou nohou a sedákem [stupně]	-
PARAMETRY	
Přibližná hmotnost kočárku [kg]	39
Rozměry kočárku ve složeném stavu D x Š x V [cm]	150 x 58 x 20
Rozměry kočárku v rozloženém stavu D x Š x V [cm]	170 x 78 x 90

Dostupné barevné varianty



Z16



Naskenujte QR
kód a dozvíte se



Dostupné barevné varianty

Vyberte si z nabídky barevných variant čalounění podle svých individuálních preferencí. Dostupné barvy se liší podle modelu – podrobnosti najdete na příslušné stránce produktu.

Námořnická modrá a modrá [Z-01]



Námořnická modrá [Z-04]



Námořnická modrá s motivem tukana [Z-06]



Šedá a tyrkysová [Z-09]



Šedá a oranžová [Z-11]



Námořnická modrá a červená [Z-12]



Šedá a červená [Z-13]



Šedá [Z-16]



Černá [Z-18]



Příslušenství

Opěradlo přizpůsobené tak, aby vyhovovalo vyčnívající části páteře [ACTAPG]



Police pro odsávací jednotku [ACPPSS]




Polohovatelné opěradlo pro polohy vleže a v pololehu [OL]



Police na ventilátor [ACPPRES]



Zvednuté područky [PP]

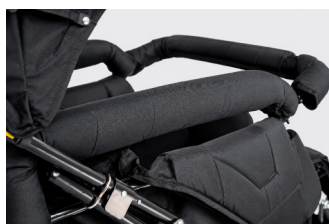


Polstrovaná ochrana opěrky nohou [ACOCHPOD]



Polstrovaná ochrana rukojeti pro tlačení [ACOCHRAČ]




Popruhy na lýtku [ACPASL]

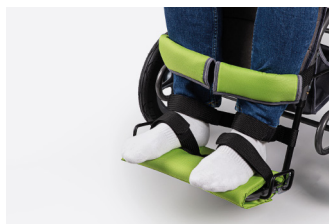

Popruhy na chodidla [ACPASS]



Popruhy na stehna [ACPASU]

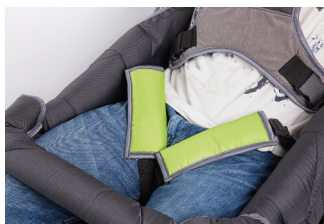

Popruhy na kotníky [ACPASK]



Bederní opěrky – podložky [ACPELOT]



Bederní polštář [ACPODUL]



Polštář sedadla [ACPODUS]



Boční polštáře [ACPODUB]




Boční opěry [UCHW.PEL]



Odkládací tácek na kočárek [ACSTOL]



Rychloupínací abdukční klín [KLIN.AB.SZ.MON]

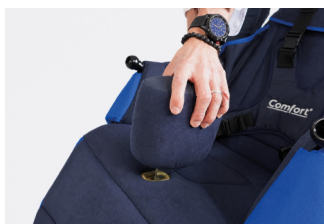

Příslušenství

Otočná přední kola
[SK1]



Nastavitelná
rukojeť pro tlačení [RL]



Taška s rukojetí
[TORBA.KOL]




Zvedák pacientů Helios 150
[PHEL]




Zařízení proti převrácení
[ACUPP]



Slunečník
[PARASOL.KOL]

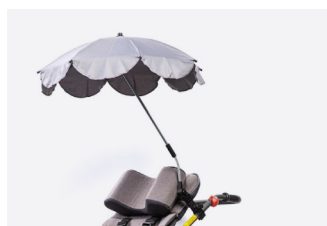

Nohavice do
kočárku [ACSPI]

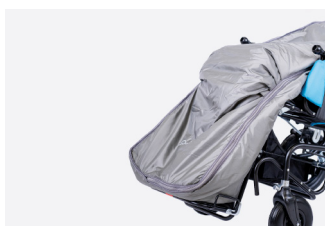

Stříška s přední
částí [BUDA]



Pláštěnka
[ACPEL]




Ortopedický polštář
ComfortMemo (velikosti S,
M, L) [ACPODZPAM]




Stabilizační polštář ve tvaru
písmene L (velikosti S, M, L)
[POD-L-STAB]




Pneumatika s duší
[ACKST4]

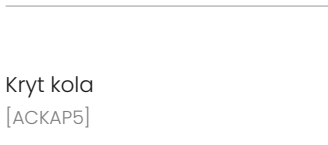


Bezdušové
kolo [ACKST5]

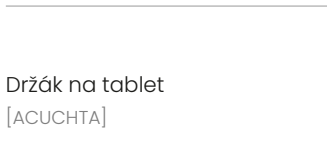


Vnitřní duše –
velikost lze vybrat [ACDET]

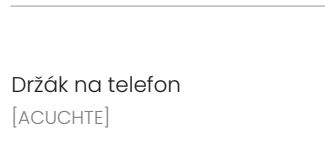


Pneumatika
[ACOP12CZ]

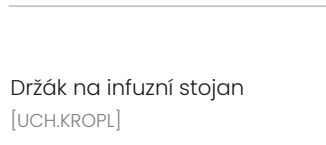

Kryt kola
[ACKAP5]

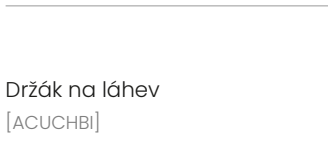


Držák na tablet
[ACUCHTA]

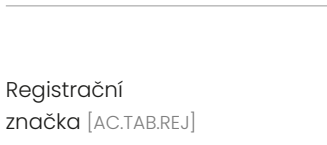


Držák na telefon
[ACUCHTE]




Držák na infuzní stojan
[UCH.KROPL]

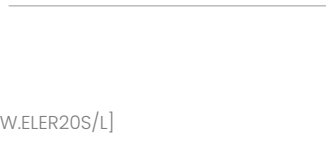


Držák na láhev
[ACUCHBI]

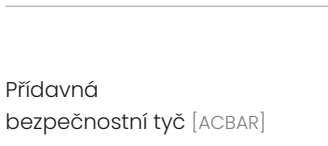


Registrační
značka [AC.TAB.REJ]

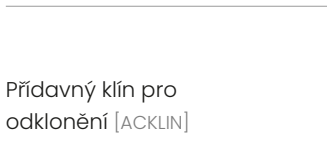


Elektrický přídavný pohon
Sunrise R20 (velikost S, L) [DOSTAW.ELER20S/L]

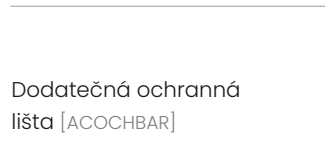


Přídavná
bezpečnostní tyč [ACBAR]

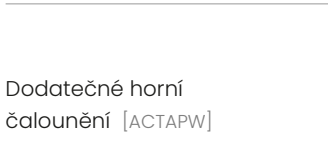


Přídavný klín pro
odklonění [ACKLIN]

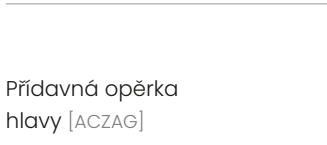


Dodatečná ochranná
lišta [ACOCBAR]

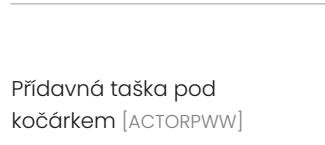


Doplňkové čtyřbodové
bezpečnostní pásy [ACPASBEZPR]




Dodatečné horní
čalounění [ACTAPW]

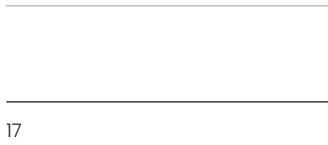

Přídavná opěrka
hlavy [ACZAG]



Přídavná taška pod
kočárkem [ACTORPWW]




Vyberte si kočárek správné velikosti

Chcete-li vybrat správnou velikost kočárku, změřte uživatele podle níže uvedených




Měření by se mělo provádět, když uživatel sedí ve své obvyklé poloze. Přesná měření pomáhají zajistit správnou velikost a konfiguraci kočárku.

K výběru vhodné velikosti kočárku jsou zapotřebí čtyři měření:

1. Výška v sedě – od povrchu sedáku po temeno hlavy
2. Hloubka sedáku – od zadní části pánve po zadní část kolena
3. Délka dolní končetiny – od zadní části kolena po chodidl nohy
4. Šířka boků

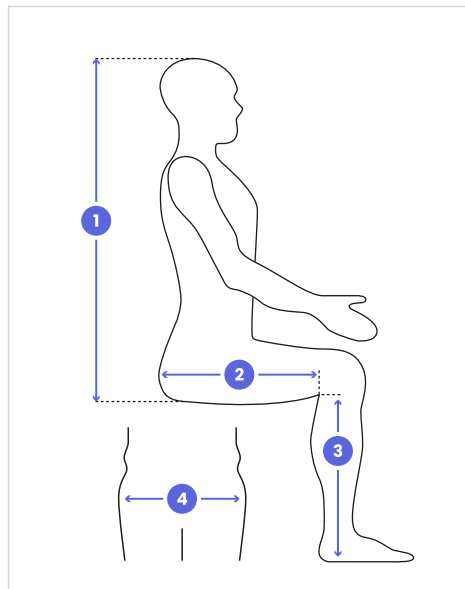

Pokud má uživatel výčnělek páteře, proveďte následující dodatečná měření:

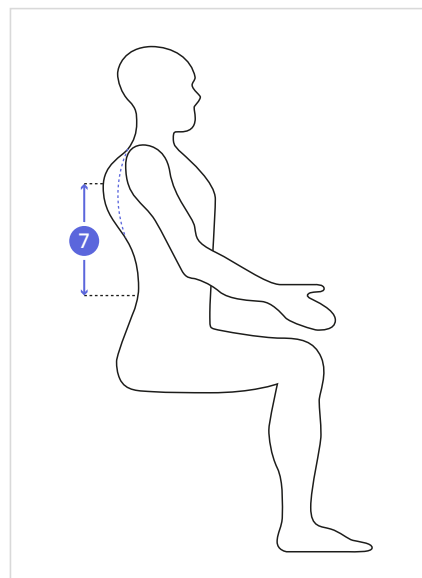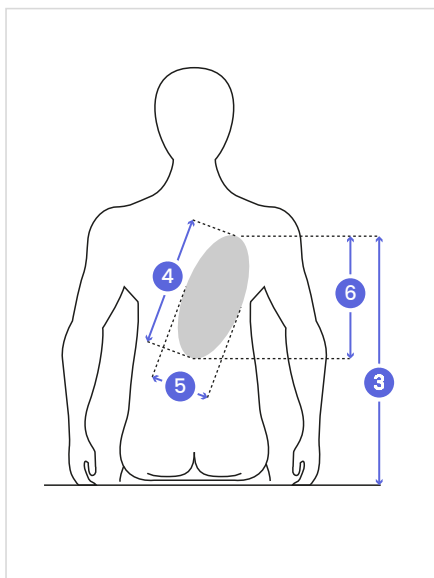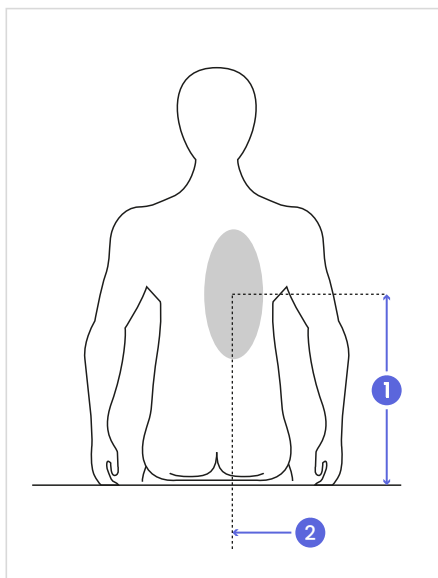

1. Vertikální poloha vrcholu
2. Horizontální poloha vrcholu
3. Nejvyšší bod základny výčnělku
4. Délka výčnělku
5. Šířka výčnělku
6. Vertikální vzdálenost mezi nejvzdálenějšími body výčnělku
7. Výška vrcholu

WSR Comfort sp. z o.o.

ul. Głazowa 43
60-116 Poznań
tel. +48 61 863 85 61
biuro@comfort-reha.pl
www.comfort-reha.pl



Speciální kočárek Comfort. Určený pro přepravu dětí a dospělých s dětskou mozkovou obrnou a jinými zdravotními problémy, které jim brání v samostatném pohybu. Kočárek musí tlačit pečovatel.

Názvy Comfort Baby, Vario a Spazio nepředstavují obchodní názvy ve smyslu nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Comfort Baby, Vario a Spazio jsou značky výrobků používané výhradně pro marketingové účely.