

Comfort[®]

PRODUKTKATALOG

**Spezial-Kurzzeit-
Rehawagen für Kinder
und Erwachsene**



Love. Care. Comfort.

Dies ist ein Medizinprodukt. Verwenden Sie es gemäß der Gebrauchsanweisung oder der Kennzeichnung.

Care. Comfort. Praxisorientiert.

Die Sorge um den Nutzer unserer Rehawagen beginnt mit einer gut durchdachten Konstruktion. Deshalb verbinden wir bei den Comfort-Rehawagen Komfort, Sicherheit, Funktionalität und individuelle Anpassung mit der Erfahrung aus mehr als 40 Jahren.



Zuverlässigkeit

Mehr als 40 Jahre Erfahrung, Produktion im eigenen Haus und eine eigene Entwicklungsabteilung in Polen geben uns die vollständige Kontrolle über die Qualität unserer Rehawagen.



Komfort

Geformte Sitzflächen und verstellbare Kopfstützen sorgen für Komfort und Stabilisierung von Kopf und Nacken.



Unterstützung

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des Modells und der Ausstattung, unterstützen unsere Partner und sorgen für einen leistungsfähigen Service.



Individuell anpassbar

Wir passen den Rehawagen nicht nur an Körpergröße und Körpergewicht, sondern auch an die individuellen Bedürfnisse eines jeden Nutzers an.



Sicherheit

Feststellbremse, Handbogen und Abduktionskeil verhindern, dass der Nutzer unserer Rehawagen von der Sitzfläche rutscht.



Funktionalität

Die Verstellung von Rückenlehne und Fußstütze ermöglicht die Anpassung des Rehawagens an jede Situation.

Das Gespräch ist erst der Anfang

Bei Comfort beginnen wir nicht mit einer fertigen Lösung, sondern mit einem Gespräch – mit dem Nutzer, der Betreuungsperson oder unserem Handelspartner. Wir möchten die alltäglichen Bedürfnisse und Herausforderungen genau verstehen, um eine Lösung anbieten zu können, die diesen tatsächlich entspricht.



Seit mehr als 40 Jahren entwickeln wir unsere Produkte auf Grundlage der Erfahrungen von Nutzern, Fachleuten und Vertriebspartnern.

Ihre Hinweise helfen uns, unsere Rehawagen kontinuierlich zu verbessern und Lösungen zu entwickeln, die tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen.

Wir verbinden die Erfahrung eines Herstellers mit dem lokalen Know-How unserer Vertriebspartner und bleiben dabei nah an unseren Kunden in verschiedenen Märkten. Außerdem unterstützen wir Stiftungen und Initiativen, die sich für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen einsetzen.

Comfort

TRIP

Häufige Fahrten zur Schule, zum Arzt oder zur Rehabilitation können bedeuten, dass der Nutzer immer wieder vom Rehawagen auf den Fahrzeugsitz und zurück umgesetzt werden muss. Jeder solche Transfer kostet Zeit und stellt sowohl für die Betreuungsperson als auch für den Nutzer eine körperliche Belastung dar.

Vielleicht verfügen Sie bereits über ein Fahrzeug, das für die Beförderung von Menschen mit Behinderungen geeignet ist – aber ist auch Ihr Rehawagen werkseitig für den Transport des darin sitzenden Nutzers angepasst und geprüft?

Comfort TRIP vereint zwei Anwendungen in einer Lösung: einen Spezial-Rehawagen für den täglichen Gebrauch und einen Rehawagen, der für den Transport des Nutzers in einem entsprechend ausgestatteten Fahrzeug vorbereitet ist.



Konformität mit ISO 7176-19:2022



Dynamische Prüfungen bestätigen die Widerstandsfähigkeit des Rehawagens und der Befestigungen gegenüber Belastungen beim Bremsen oder bei einem Aufprall.

Vierpunktbefestigung



Zwei Befestigungspunkte vorne und zwei hinten gemäß ISO 10542-1 sichern den Rehawagen bei Verkehrsunfällen stabil.

Vielseitige Anwendung

Geeignet für den Transport, zu Hause, in der Schule, bei der Rehabilitation und auf Reisen.

Verstärkter Rahmen



Für die Kräfte ausgelegt, die beim Bremsen und in Verkehrssituationen auf den Rehawagen wirken.

Vielfältige Ausstattung

Schwenkbare Räder erleichtern das Manövrieren, der klappbare Schiebegriff verkürzt die Länge des Rehawagens und die zurückklappbare Rückenlehne ermöglicht eine Liegeposition.

Technische Spezifikation

Größe	3	4	5	6	6+	7
NUTZER						
Richtalter des Nutzers [Jahre]	3–6	6–12	6–14	od 14	od 14	od 14
Max. Gewicht des Nutzers [kg]	35	50	50	75	75	90
Max. Körpergröße des Nutzers [cm]	140	145	155	155–165	160–180	160–180
SITZ						
Sitzbreite [cm]	35	38	38	41	41	44,5
Sitzlänge [cm]	33	37	41	45	48	48
Rückenlehnenhöhe [cm]	66,5	70	76,5	78	83	83
Max. Winkel der Rückenlehne zur Sitzfläche [°]	bis 150°	bis 145°	up to 150°	bis 140°	bis 140°	bis 140°
VERSTELLUNG						
Höhenverstellbereich der Fußstütze [cm]	27,5–33,5	31,5–42	32–42,5	36–46	36–46	36,5–46,5
Winkel der Fußstütze zur Sitzfläche [°]	110°–145°	100°–135°	95°–135°	100°–140°	95°–150°	90°–130°
PARAMETER						
Ungefähres Wagengewicht [kg]	24	26	26	29,2	29,5	31
Abmessungen, ausgeklappt L x B x H [cm]	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54
Abmessungen, zusammengeklappt L x B x H [cm]	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95

Erhältliche Farbkombinationen



Den QR-Code scannen
und mehr erfahren



Comfort

Easy Vero

Noch vor einigen Jahren war es für Sie kein großes Problem, den Nutzer vom Rehawagen ins Bett, auf das Sofa oder in die Badewanne umzusetzen.

Doch ist dieser Transfer mit zunehmender Körpergröße und zunehmendem Körpergewicht immer belastender geworden? Oder benötigen Sie bei der täglichen Betreuung einen einfachen und ungehinderten Zugang zum Nutzer, der durch die fest montierten Seitenteile des Rehawagens eingeschränkt wird?

Comfort Easy Vero ist ein speziell entwickelter Rehawagen, der die Funktionalität, Qualität und Belastbarkeit der Comfort-Rehawagen mit einfach abnehmbaren Seitenteilen kombiniert. Das erleichtert den Transfer und die Betreuung des Nutzers.



Offene Konstruktion



Abnehmbare Seitenteile und die offene Konstruktion erleichtern den Transfer, den Positionswechsel und die Pflege.

Kompatibel mit Hebeliftern



Die offene Konstruktion des Rehawagens erleichtert den Transfer mit verschiedenen Spezialliftern.

Klin Click



Abduktionskeil mit einer Vorrichtung für eine schnelle und einfache Montage und Demontage.

Einfaches Zusammenklappen und Transportieren

Der Rehawagen lässt sich leicht zusammenklappen und passt problemlos auch in den Kofferraum eines kleineren Pkw.

Technische Spezifikation

Größe	3	4	5	6	6+	7	8
NUTZER							
Richtalter des Nutzers [Jahre]	3–6	6–12	6–14	od 14	od 14	od 14	od 14
Max. Gewicht des Nutzers [kg]	35	50	50	75	75	90	130
Max. Körpergröße des Nutzers [cm]	140	145	155	150–165	160–180	160–180	160–180
SITZ							
Sitzbreite [cm]	35	38	38	41	41	44,5	52,5
Sitzlänge [cm]	33	37	41	45	48	48	48
Rückenlehnenhöhe [cm]	66,5	70	76,5	78	83	83	83
Max. Winkel der Rückenlehne zur Sitzfläche [°]	bis 135°–150°	bis 130°–145°	bis 135°–150°	bis 120°–140°	bis 120°–140°	bis 120°–140°	bis 120°–140°
VERSTELLUNG							
Höhenverstellbereich der Fußstütze [cm]	27,5–33,5	31,5–42	32–42,5	36–46	36–46	36,5–46,5	36,5–46,5
Winkel der Fußstütze zur Sitzfläche [°]	110°–145°	100°–135°	95°–135°	100°–140°	95°–150°	90°–130°	90°–130°
PARAMETER							
Ungefähres Wagengewicht [kg]	22	24	24	27,2	27,5	29	33
Abmessungen, ausgeklappt L x B x H [cm]	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54	122 x 78 x 95
Abmessungen, zusammengeklappt L x B x H [cm]	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95	148 x 78 x 95

Erhältliche Farbkombinationen



Z04 Z16 Z18

Den QR-Code scannen
und mehr erfahren



Comfort Spezial-Rollstuhl

Baby

Die Wahl eines der ersten Spezial-Rehawagen für Ihr Kind ist eine wichtige Entscheidung. Neben einer angemessenen Unterstützung des Kindes spielt auch der Komfort der Betreuungsperson eine wichtige Rolle. Der Rehawagen sollte sich leicht lenken und zusammenklappen lassen, problemlos in den Kofferraum passen und einfach zu reinigen sein. Suchen Sie eine leichte, kompakte Lösung für die jüngsten Nutzer, die Ihnen gleichzeitig die tägliche Betreuung erleichtert?

Comfort Baby ist das kleinste Modell im Comfort-Sortiment. Es wurde für die jüngsten Nutzer entwickelt, die eine geeignete Unterstützung von Kopf, Rumpf und Gliedmaßen benötigen. Seine Konstruktion unterstützt eine stabile und komfortable Position des Kindes. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht es, den Rehawagen an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers anzupassen.



Kompakte Konstruktion



Der Rehawagen lässt sich leicht zusammenklappen und passt problemlos in den Kofferraum Ihres Fahrzeugs, was den Transport erheblich erleichtert.

Klappbarer Schiebegriff



Ermöglicht die Anpassung der Griffhöhe an die Körpergröße der Begleitperson und sorgt so für ein bequemerer Schieben des Wagens.

Rückenlehne zurücklehnbar in die Liegeposition



Schwenkbare Vollgummiräder

Erleichtert das Manövrieren zu Hause, in engen Räumen und beim Spaziergang. Die Vollbereifung eliminiert das Risiko von Reifenpannen.

Leicht zu reinigende Polsterung

Das verwendete Material erleichtert die Entfernung alltäglicher Verschmutzungen.

Ermöglicht eine Veränderung der Position des Kindes und eine bequeme Ruheposition.

Technische Spezifikation

Größe	1
NUTZER	
Richtalter des Nutzers [Jahre]	0-3
Max. Gewicht des Nutzers [kg]	30
Max. Körpergröße des Nutzers [cm]	110
SITZ	
Sitzbreite [cm]	33,5
Sitzlänge [cm]	27
Rückenlehnenhöhe [cm]	55
Max. Winkel der Rückenlehne zur Sitzfläche [°]	bis 130-150°
VERSTELLUNG	
Höhenverstellbereich der Fußstütze [cm]	23-26
Winkel der Fußstütze zur Sitzfläche [°]	110°-155°
PARAMETER	
Ungefähres Wagengewicht [kg]	15
Abmessungen, ausgeklappt L x B x H [cm]	97,5 x 55 x 50,5
Abmessungen, zusammengeklappt L x B x H [cm]	111 x 55 x 92

Erhältliche Farbkombinationen



Den QR-Code scannen
und mehr erfahren



Comfort Spezial-Rollstuhl

Vario

Der Alltag des Nutzers beschränkt sich nicht auf einen einzigen Ort. Der Rehawagen sollte zu Hause, in der Stadt und bei Spaziergängen – auch in anspruchsvollerem Gelände – eine komfortable und stabile Position gewährleisten. Gleichzeitig muss er den individuellen Bedürfnissen entsprechen, die sich aus der Körperform und dem erforderlichen Halt ergeben. Suchen Sie einen vielseitigen Rehawagen, der individuell an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden kann?

Comfort Vario ist die vielseitigste Produktlinie der Comfort-Rehawagen und bekannt für ihre Funktionalität, hochwertige Verarbeitung und Belastbarkeit. Sie ist in einem breiten Größenspektrum erhältlich und eignet sich sowohl für kleinere als auch für größere Nutzer. Die umfangreichen Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration ermöglichen eine noch präzisere Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Person.



Profilierte Polsterung



Unterstützt die Propriozeption und eine stabile Position und sorgt auch bei mehrstündiger Nutzung für Komfort.

Doppelpolsterung



Ein zusätzlicher Polstersatz ermöglicht die Nutzung des Rehawagens, während eine andere Polsterung gereinigt wird.

Individuell anpassbar



Eine große Auswahl an Zubehör und Sonderlösungen ermöglicht die Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers und der Betreuungsperson.

Verstellung der Position

Der verstellbare Winkel von Rückenlehne und Fußstütze ermöglicht die Anpassung der Körperposition an die individuellen Bedürfnisse.

Breites Größenspektrum

Der Rehawagen ist in vielen Größen erhältlich und so eignet sich sowohl für kleinere als auch für größere Nutzer.

Technische Spezifikation

Größe	3	4	5	6	6+	7
NUTZER						
Richtalter des Nutzers [Jahre]	3–6	6–12	6–14	od 14	od 14	od 14
Max. Gewicht des Nutzers [kg]	35	50	50	75	75	90
Max. Körpergröße des Nutzers [cm]	140	145	155	150–165	160–180	160–180
SITZ						
Sitzbreite [cm]	35	38	38	41	41	44,5
Sitzlänge [cm]	33	37	41	45	48	48
Rückenlehnenhöhe [cm]	66,5	70	76,5	78	83	83
Max. Winkel der Rückenlehne zur Sitzfläche [°]	bis 135°–150°	bis 130°–145°	bis 135°–150°	bis 120°–140°	bis 120°–140°	bis 120°–140°
VERSTELLUNG						
Höhenverstellbereich der Fußstütze [cm]	27,5–33,5	31,5–42	32–42,5	36–46	36–46	36,5–46,5
Winkel der Fußstütze zur Sitzfläche [°]	110°–145°	100°–135°	95°–135°	100°–140°	95°–150°	90°–130°
PARAMETER						
Ungefähres Wagengewicht [kg]	21	23	23	26,2	26,5	28
Abmessungen, ausgeklappt L x B x H [cm]	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54
Abmessungen, zusammengeklappt L x B x H [cm]	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95

Erhältliche Farbkombinationen



Den QR-Code scannen
und mehr erfahren



Comfort Spezial-Rollstuhl

Spazio

Ein größerer Nutzer benötigt ausreichend Platz und eine entsprechende Tragfähigkeit, sollte dabei aber nicht auf eine stabile Unterstützung verzichten müssen. Einen passiven Rehawagen zu finden, der all diese Eigenschaften vereint, stellt häufig eine große Herausforderung dar.

Suchen Sie einen Spezial-Rehawagen, der einem größeren Nutzer ausreichend Platz, Komfort und eine stabile Position bietet?

Comfort Spazio ist das größte Modell der Comfort-Spezial-Rehawagen. Es ist nicht einfach eine vergrößerte Version der Vario-Linie – seine Konstruktion wurde speziell auf höhere Belastungen und die Bedürfnisse besonders großer Nutzer ausgelegt. Dabei bleiben die Möglichkeiten zur Stabilisierung, die Funktionalität und die umfangreichen Optionen zur individuellen Anpassung erhalten.



Verstärkter Rahmen



Speziell für Nutzer mit einem Körpergewicht bis 130 kg ausgelegt.

Großzügige Sitzfläche



Die Sitzbreite von 52,5 cm bietet ausreichend Platz für Nutzer, für die kleinere Größen nicht ausreichen.

Profilierte Polsterung



Unterstützt die Propriozeption und eine stabile Position und sorgt auch bei mehrstündiger Nutzung für Komfort.

Körperstabilisierung

Ein tiefer, verstellbarer Kopfstützenbereich, Gurte und zusätzliche Stützelemente helfen, Kopf, Rumpf und Gliedmaßen in der richtigen Position zu halten.

Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten

Eine große Auswahl an Zubehör und Sonderlösungen ermöglicht die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers.

Technische Spezifikation

Größe	8
NUTZER	
Richtalter des Nutzers [Jahre]	od 14
Max. Gewicht des Nutzers [kg]	130
Max. Körpergröße des Nutzers [cm]	160–180
SITZ	
Sitzbreite [cm]	52,5
Sitzlänge [cm]	48
Rückenlehnenhöhe [cm]	83
Max. Winkel der Rückenlehne zur Sitzfläche [°]	bis 120°–140°
VERSTELLUNG	
Höhenverstellbereich der Fußstütze [cm]	36,5–46,5
Winkel der Fußstütze zur Sitzfläche [°]	90°–130°
PARAMETER	
Ungefähres Wagengewicht [kg]	32
Abmessungen, ausgeklappt L x B x H [cm]	122 x 78 x 95
Abmessungen, zusammengeklappt L x B x H [cm]	148 x 78 x 95

Erhältliche Farbkombinationen



Den QR-Code scannen
und mehr erfahren



Comfort

Coala

Bei Menschen mit infantiler Zerebralparese und anderen neurologischen Erkrankungen können eine sehr ausgeprägte Spastik, eine erhebliche Muskelschwäche oder eine extreme Hypotonie in Verbindung mit einer fehlenden Kopfkontrolle auftreten. Bei einigen Nutzern kommt es zudem zu einer ausgeprägten, en-bloc-artigen Körpersteifigkeit, insbesondere im Bereich des Beckens, der Gelenke der unteren Extremitäten und der Wirbelsäule. Wenn diese Beeinträchtigungen chronischer Natur sind, kann es unmöglich sein, eine sitzende oder halbsitzende Position einzunehmen und beizubehalten. Suchen Sie eine Lösung, die es einem solchen Nutzer ermöglicht, sich auch außerhalb des Bettes in einer liegenden Position aufzuhalten?

Comfort Coala ist ein spezialisierter Rehawagen für Nutzer, die sich überwiegend in horizontaler Position aufhalten.



Die Verstellung von Rückenlehne



Die Rückenlehne lässt sich im Bereich von 150°–180° verstellen und ermöglicht das Anheben des Oberkörpers sowie die Anpassung seiner Position an die Bedürfnisse des Nutzers.

Ablagen für medizinische Geräte



Bieten Platz für notwendige Geräte wie Beatmungsgerät oder Absauggerät.

Abnehmbarer Sitz



Der Sitz kann vom Rahmen getrennt werden; Griffe erleichtern das Tragen.

Vielfältige Ausstattung

Die schwenkbaren Vorderräder erleichtern das Manövrieren und der klappbare Schiebegriff verkürzt die Länge des Rehawagens für den Transport.

Stabiler Stand

Dank der ausklappbaren Stützbeine lässt sich der Rehawagen bei längeren Pausen stabil abstellen.

Technische Spezifikation

Größe	9
NUTZER	
Richtalter des Nutzers [Jahre]	-
Max. Gewicht des Nutzers [kg]	75
Max. Körpergröße des Nutzers [cm]	180
SITZ	
Sitzbreite [cm]	45
Sitzlänge [cm]	100
Rückenlehnenhöhe [cm]	40
Max. Winkel der Rückenlehne zur Sitzfläche [°]	bis 180°
VERSTELLUNG	
Höhenverstellbereich der Fußstütze [cm]	-
Winkel der Fußstütze zur Sitzfläche [°]	-
PARAMETER	
Ungefähres Wagengewicht [kg]	39
Abmessungen, ausgeklappt L x B x H [cm]	150 x 58 x 20
Abmessungen, zusammengeklappt L x B x H [cm]	170 x 78 x 90

Erhältliche Farbkombinationen



Z16



Den QR-Code scannen
und mehr erfahren



Erhältliche Farb- kombinationen

Die Polsterung kann aus fertigen Farbkombinationen ausgewählt werden, um den Rehawagen an die individuellen Wünsche anzupassen. Die Verfügbarkeit der Farben hängt vom Modell ab – Einzelheiten finden Sie bei der Beschreibung des jeweiligen Rehawagens im Katalog.

Marineblau-Blau [Z-01]



Marineblau [Z-04]



Marineblau mit Tukanmotiv [Z-06]



Grau-Türkis [Z-09]



Grau-Orange [Z-11]



Marineblau-Rot [Z-12]



Grau-Rot [Z-13]



Grau [Z-16]



Schwarz [Z-18]



Zubehör

Rückenlehne an Rundrücken angepasst [ACTAPG]




Absauggeräteablage [ACPPSS]



Rückenlehne zurücklehnbar in die Liege- oder Halbliegeposition [OL]



Beatmungsgeräteablage [ACPPRES]

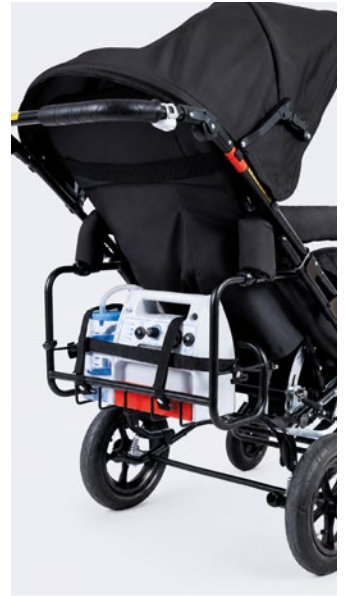

Erhöhte Armlehnen [PP]



Fußstützenschutz [ACCHPOD]



Schiebegriffschutz [ACCHHRAC]



Wadenriemen [ACPASL]



Fußriemen [ACPASS]



Oberschenkelriemen [ACPASU]



Knöchelriemen [ACPASK]



Lendenwirbelstützen – Pelotten [ACPELOT]



Lendenkissen [ACPODUL]



Sitzkissen [ACPODUS]



Seitenkissen [ACPODUB]



Seitliche Pelotten [UCHW.PEL]



Ablagetisch [ACSTOL]



Abduktionskeil mit Schnellmontage [KLIN.AB.SZ.MON]



Zubehör

Schwenkbare
Vorderräder [SK1]



Verstellbarer Schiebegriff
[RL]



Tasche für Schiebegriff
[TORBA.KOL]




Lifter Helios 150
[PHEL]




Kippschutz
[ACUPP]



Sonnenschirm
[PARASOL.KOL]

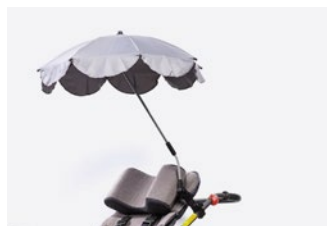

Schlupfsack
[ACSPI]

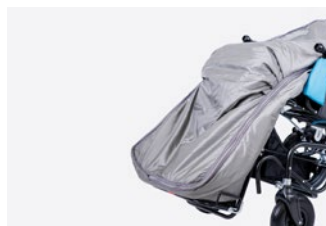

Verdeck mit Beindecke
[BUDA]



Regencape
[ACPEL]




Orthopädisches Kissen
ComfortMemo (Größe S, M, L)
[ACPODZPAM]




L-förmiges Stabilisierungskissen
(Größe S, M, L)
[POD-L-STAB]




Luftreifenrad
[ACKST4]

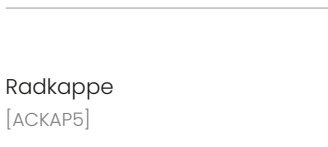


Pannensicheres Rad
[ACKST5]

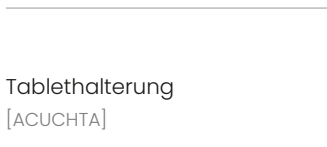


Schlauch – Größe
nach Wahl [ACDET]

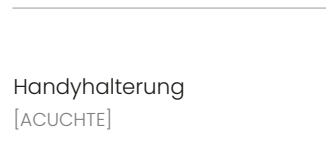


Reifen für Rad
[ACOP12CZ]

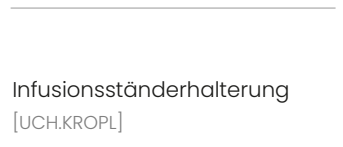

Radkappe
[ACKAP5]

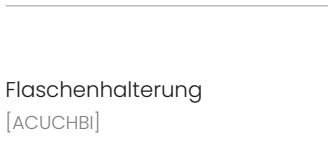


Tablethalterung
[ACUCHTA]

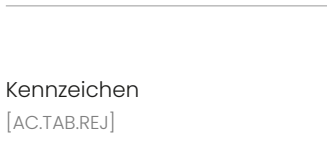


Handyhalterung
[ACUCHTE]




Infusionsständerhalterung
[UCH.KROPL]

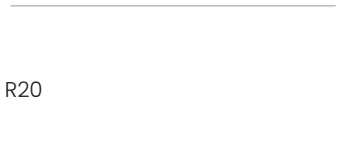


Flaschenhalterung
[ACUCHBI]

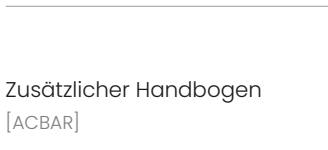


Kennzeichen
[AC.TAB.REJ]

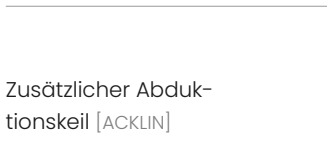


Elektrische Antriebshilfe Sunrise R20
(Größe S, L) [DOSTAW.ELER20S/L]

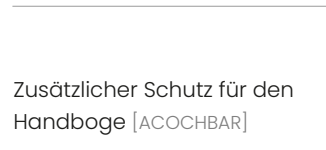


Zusätzlicher Handbogen
[ACBAR]

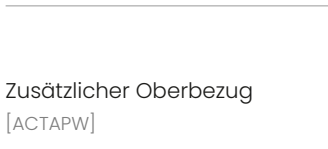


Zusätzlicher Abduk-
tionskeil [ACKLIN]

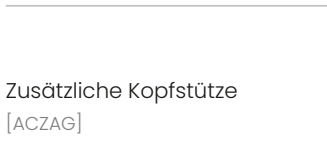

Zusätzlicher Schutz für den
Handbogen [ACOCBAR]

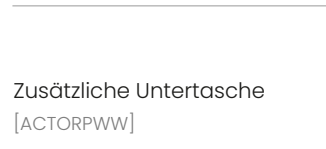

Zusätzliche Vierpunkt-Si-
cherheitsgurte [ACPASBEZPR]



Zusätzlicher Oberbezug
[ACTAPW]



Zusätzliche Kopfstütze
[ACZAG]



Zusätzliche Untertasche
[ACTORPWW]




Wählen Sie die passende Größe Ihres Rehawagens

Um die richtige Größe des Rehawagens zu bestimmen, messen Sie den Nutzer gemäß der folgenden Anleitung aus.




Die Messungen sollten in der natürlichen Sitzposition des Nutzers durchgeführt werden. Genaue Maße helfen dabei, die passende Größe zu wählen und die individuelle Konfiguration des Rehawagens festzulegen.

Für die Auswahl der passenden Rehawagengröße werden vier Maße benötigt:

1. Rumpflänge vom Sitz bis zum Scheitel
2. Länge vom Rücken bis zur Kniekehle
3. Unterschenkelänge von der Kniekehle bis zur Fußsohle
4. Hüftbreite

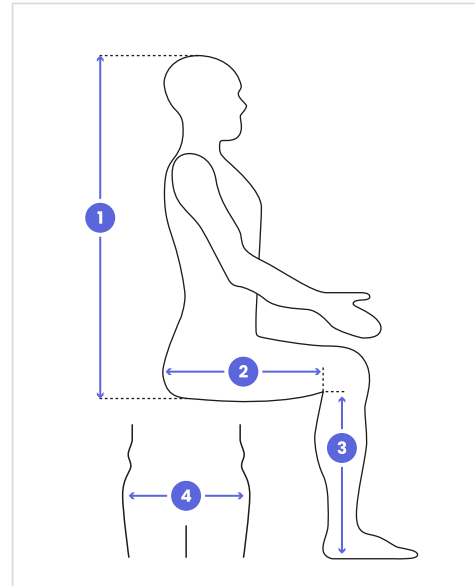

Bei einem Rundrücken werden zusätzliche Maße benötigt:

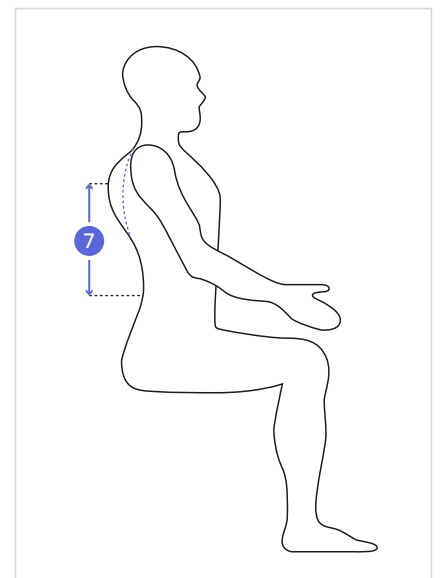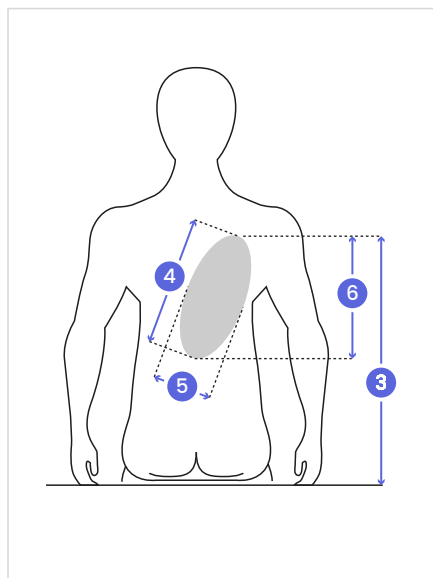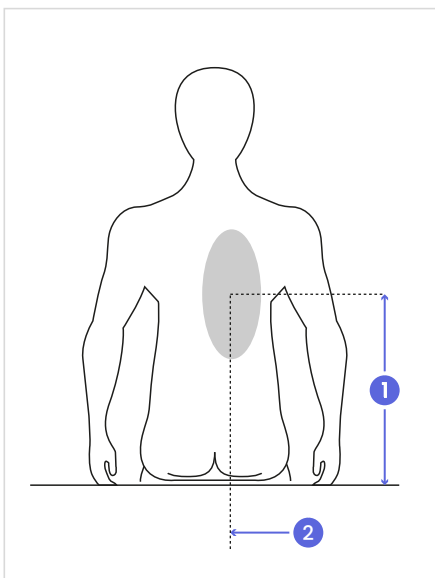

1. Vertikale Position des Scheitelpunkts des Rundrückens
2. Horizontale Position des Scheitelpunkts des Rundrückens
3. Höchster Punkt der Basis des Rundrückens
4. Länge des Rundrückens
5. Breite des Rundrückens
6. Vertikaler Abstand zwischen den äußersten Punkten des Rundrückens
7. Höhe des Scheitelpunkts des Rundrückens

WSR Comfort sp. z o.o.

ul. Głazowa 43
60-116 Poznań
tel. +48 61 863 85 61
biuro@comfort-reha.pl
www.comfort-reha.pl



Comfort Spezial-Rollstuhl. Bestimmt für den Transport von Kindern und Erwachsenen mit infantiler Zerebralparese und anderen Erkrankungen, die eine selbstständige Fortbewegung unmöglich machen. Der Rollstuhl muss von einer Begleitperson geschoben werden.

Comfort Baby, Vario und Spazio stellen keine Handelsnamen im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte dar. Comfort Baby, Vario und Spazio sind Produktmarken, die ausschließlich Marketingzwecken dienen.